

5.4-ENR019



Manuel de prélèvement du laboratoire



10 rue du Colonel Driant

75001 Paris

Tel : 01.53.45.86.85

Horaires du laboratoire :

du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

TABLE DES MATIERES

	1
PRELEVEMENT AU LABORATOIRE	4
<i>VERIFICATION DES SALLES DE PRELEVEMENT</i>	4
<i>PRISE DU DOSSIER</i>	4
<i>VERIFICATION DE L'IDENTITE DU PATIENT</i>	4
<i>VERIFICATION DE LA PRESCRIPTION</i>	4
<i>RENSEIGNEMENTS CLINIQUES</i>	4
<i>PRELEVEMENT</i>	5
<i>ELIMINATION DES DECHETS</i>	5
<i>TRANSMISSION EN ZONE TECHNIQUE</i>	5
IDENTITO-VIGILANCE	7
<i>DESCRIPTIF</i>	7
<i>DISPOSITIFS PERMETTANT DE VALIDER UNE IDENTITE</i>	7
<i>ETIQUETTES D'IDENTIFICATION</i>	8
<i>AU PRELEVEMENT</i>	8
<i>EN TECHNIQUE</i>	9
CHOIX, ORDRE ET TEMPS D'AGITATION DES TUBES	10
FICHE DE SUIVI MEDICAL	12
TRAITEMENT DES DEMANDES D'ANALYSES	13
<i>DEMANDES TRAITÉES PAR LE LABORATOIRE</i>	13
<i>CRITERES D'ACCEPTATION</i>	13
<i>VERIFICATION DE L'IDENTITE</i>	14
<i>ANALYSES DEMANDEES</i>	14
<i>CAS PARTICULIERS DES AVANT-VISITES</i>	14
<i>INFORMATIONS A DONNER AU PATIENT LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE SA DEMANDE</i>	14
<i>RENSEIGNEMENTS CLINIQUES</i>	14
<i>CONTROLE DES ANALYSES</i>	15
<i>TRAITEMENT DE L'URGENCE</i>	15
<i>CAS PARTICULIERS</i>	15
<i>NON-CONFORMITE</i>	17
<i>CAS PARTICULIER DES PATIENTS NON A JEUN, LA SECRETAIRE SAISIT LE CODE NAJ.</i>	17
<i>POUR LES ANOMALIES LIEES A LA PRESCRIPTION OU A LA FICHE DE TRANSMISSION DE PRELEVEMENT : LA SECRETAIRE SE REFERE A L'INSTRUCTION 5.4-INS023.</i>	17
<i>TOUTE NON-CONFORMITE EST ENREGISTREE ET TRAITÉE SELON L'INSTRUCTION 4.9-INS003.</i>	17
FICHE DE TRANSMISSION DE PRELEVEMENT/SUIVI MEDICAL	18
CRITERES D'ACCEPTATION ET DE REJET DES ECHANTILLONS	19
TRAITEMENT DES DEMANDES D'ANALYSES SANS PRESCRIPITON ECRITE OU HORS NOMENCLATURE	20
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT SANGUIN	21
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT VAGINAL	23
INSTRUCTION D'AUTO PRELEVEMENT VAGINAL	24
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT URETRAL	25

PRECONISATIONS PATIENT POUR LA RECHERCHE DE CHLAMYDIAE/MYCOPLASMES	26
INSTRUCTION D AUTOPRELEVEMENT ANAL ET GORGE POUR RECHERCHE DE CHLAMYDIAE/MYCOPLASMES	27
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT ORL	28
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT M POX	29
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT MYCOLOGIQUE	30
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT SARCOPTÉ-DEMODEX-MALASSEZIA FURFUR	31
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT DE PUS SUPERFICIEL (BAGE)	32
INSTRUCTION DE PRELEVEMENT TEST RESPIRATOIRE A L'UREE HELICOBACTER PYLORI: HELI-KIT®	33
LISTE DES ANALYSES NECESSITANT DES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES	34
QUESTIONNAIRE DIAGNOSTIC DU PALUDISME	36
PRECONISATIONS POUR LE PATIENT : RECUEIL D'URINE POUR ECBU 2 EME JET	37
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ECBU	38
PRECONISATIONS ET RENSEIGNEMENTS CLINIQUES URINES DE 24H	39
PRECONISATION ET RENSEIGNEMENTS CLINIQUES RECUEIL DE SELLES	40
PRECONISATIONS ET RENSEIGNEMENTS CLINIQUES SCOTCH-TEST	41
PRECONISATIONS ET RENSEIGNEMENTS CLINIQUES COMPTE D'ADDIS (HLM)	42
CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT AU PRELEVEMENT	43
CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT EXPOSITION AU SANG OU AUTRE LIQUIDE BIOLOGIQUE	44
CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT THERMIQUE OU CHIMIQUE	45
ELIMINATION DES DECHETS	48
LISTE DES SOUS-TRAITANTS	50
CATALOGUE DES ANALYSES REALISEES AU LABORATOIRE	51

PRELEVEMENT AU LABORATOIRE

 5.4-PR004 V17

VERIFICATION DES SALLES DE PRELEVEMENT

Les salles de prélèvement sont réapprovisionnées régulièrement au cours de la journée en fonction des besoins par les préleveurs et l'aide laboratoire.

La conformité du matériel utilisé est vérifiée par les préleveurs lors de l'utilisation. La péremption est contrôlée par les préleveurs. La traçabilité des numéros de lots de tubes est notée sur le tableau 5.3-ENR006 dans chaque salle de prélèvements.

La traçabilité de l'ouverture des boîtes (tubes, aiguilles...) est tracée sur le logiciel Kalilab.

PRISE DU DOSSIER

Après enregistrement, les dossiers sont déposés par ordre chronologique d'enregistrement dans la bannette prévue à cet effet à l'accueil. Les préleveurs prennent les dossiers par ordre chronologique d'enregistrement et appellent le patient au minimum par sa civilité (Mr, Mme, Melle, enfant), et son nom.

VERIFICATION DE L'IDENTITE DU PATIENT

Se référer à la procédure 5.4-PR002 « Identitovigilance »

Dans le cas où :

- les résultats sont postés au patient, le préleveur vérifie que l'adresse est correcte.
- il est convenu que le laboratoire appelle le patient pour lui dire que ses résultats sont prêts, le préleveur vérifie le numéro de téléphone.
- L'envoi se fait par mail, le préleveur vérifie l'adresse mail.

Dans le cas d'une discordance avec la carte vitale, se référer à l'instruction 5.4-INS019 « Conduite à tenir en cas de discordance entre la carte vitale et l'identité du patient »

S'il y a une non-conformité, Celle-ci sera enregistrée selon la procédure des non-conformités « 4.9-PR002 ».

VERIFICATION DE LA PRESCRIPTION

Dans la salle de prélèvement le préleveur vérifie la cohérence entre la prescription et l'enregistrement. Il vérifie en particulier :

- la conformité d'enregistrement du prescripteur
- la conformité d'enregistrement des analyses

Ces vérifications constituent une revue de contrat. Toute non-conformité est enregistrée et traitée selon la procédure en vigueur.

Le préleveur s'assure également de la conformité des conditions de prélèvement comme elles sont décrites dans le manuel de prélèvement (état de jeûne, périodes de repos pour les paramètres le nécessitant (prolactine), heure de prélèvement à respecter (acth, prolactine, cortisol, ctx...)).

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Le préleveur renseigne la « fiche de suivi » 5.4-ENR016 :

- Heure de prélèvement
- Initiales du préleveur
- Raison des analyses
- Cocher la case « vérification de prescription et identité »
- Rendu des résultats : moyens (mail, poste...).
- Le préleveur transmet à l'oral et inscrit sur le carton de rendu de résultat la date prévue de rendu.

Cette fiche est ensuite remise dans le dossier avec l'ordonnance et sera scannée par les secrétaires dans le dossier du patient de façon que le biologiste puisse y avoir accès au moment de la validation. L'original sera archivé et détruit au bout de deux mois

Dans le cas d'un prélèvement pour la recherche de paludisme, le préleveur complétera la fiche de renseignement clinique « 5.4-INS004 ou 5.4-INS011 » avec le patient et apposera ses initiales sur le document.

PRELEVEMENT

A noter que pour les prélèvements sanguins, le prélèvement se fait obligatoirement le même jour que l'enregistrement du dossier. La date de prélèvement est donc par défaut la date d'enregistrement du dossier.

Pour les dossiers avec urines, le recueil d'urines peut avoir lieu un jour différent de la date d'enregistrement du dossier ; dans ce cas le code COMU est ajouté pour préciser la date de recueil des urines.

Le préleveur appose ses initiales, l'heure de prélèvement et la notion d'identitovigilance sur la fiche de suivi pour les patients « externes » et sur la prescription pour les patients « société » aux endroits spécifiés.

En cas de patient « société Avant-visite », il n'existe pas de cases à cocher sur le document, le préleveur doit donc inscrire la notion de jeun, la réalisation de l'identitovigilance, l'heure de prélèvement et ses initiales en bas du document. Afin d'éviter un surplus important de tubes surnuméraires EDTA, le préleveur demande au patient s'il possède un document comportant son groupe sanguin et phénotype et si le patient est déjà venu l'année dernière. Dans ce cas, ne pas prendre de tube EDTA en plus.

Les prélèvements sont réalisés suivant les modalités décrites dans le manuel de prélèvement. Le matériel à utiliser est celui décrit dans le manuel de prélèvement.

Pour les analyses sous-traitées, le préleveur se réfère au document 5.4-INS057 et au référentiel du sous-traitant.

Le préleveur identifie les échantillons devant le patient avec les étiquettes d'identification. Il prend bien soin d'étiqueter les échantillons avec les étiquettes correspondant aux automates lorsqu'elles existent en respectant les règles décrites dans le manuel de prélèvement et les tubes correspondants aux analyses prescrites (tube sec avec ou sans gel, tube EDTA, tube citraté...).

En cas de demande urgente, le préleveur surligne (Stabilo..) le numéro du patient sur les échantillons concernés, les transmet le plus rapidement possible et prévient de l'urgence la zone technique.

Après prélèvement, les dossiers sont remis au secrétariat pour que les prescriptions et les différents documents des patients externes et sociétés soient scannés dans le dossier par le secrétariat.

ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des déchets contaminés et non contaminés est faite selon l'instruction en vigueur 5.2-INS003 « Elimination des déchets ».

TRANSMISSION EN ZONE TECHNIQUE

Les échantillons sont transmis en zone technique par les préleveurs eux-mêmes ou par le technicien en poste à la paillasse de décantation ou les techniciens du RDC au moins une fois par heure.

Lorsque l'échantillon nécessite un traitement particulier de façon urgente, ou lorsqu'il s'agit d'une demande urgente, le préleveur le transmet juste après le prélèvement en zone technique et prévient le technicien en poste à la paillasse de décantation qu'il y a un prélèvement à traiter d'urgence.

DESCRIPTIF

Le laboratoire s'engage à respecter les règles de vérification et d'identification des patients conformément au RNIV (excepté la qualification du statut de l'identité).

L'enregistrement des traits d'identité se fait conformément au document 5.4-INS068 (Règles de vérification et d'enregistrement de l'identité des patients).

DISPOSITIFS PERMETTANT DE VALIDER UNE IDENTITE

La pièce d'identité demandée sera en priorité le passeport ou à défaut :

-Pour les usagers Français : la carte nationale d'identité.

-Pour les usagers étrangers : le titre de séjour, ou de la carte d'identité nationale pour les ressortissants de l'Union européenne (UE), de la Suisse, du Liechtenstein, de la Norvège, de l'Islande, du Vatican ainsi que des Principautés de Monaco, Saint Marin et Andorre.

- Pour les mineurs : dans l'ordre de priorité : la carte nationale d'identité, le livret de famille, l'acte de naissance.

Enregistrement des patients externes : en cas de non-présentation de document officiel, demander au patient d'apporter une pièce d'identité lors de sa venue au laboratoire pour récupérer les résultats ou lors d'un prochain prélèvement.

Les cas particuliers (exemple : discordance entre 2 documents d'identité) ainsi que les règles d'enregistrement des traits d'identité sont décrits dans le document 5.4-INS068 : « Règles de vérification et d'enregistrement de l'identité des patients.

Enregistrer les patients dans la base INSi. Saisir le type de justificatif d'identité dans le SIL (passeport, carte nationale d'identité...). L'identité du patient sera alors confrontée à la base INSi et un statut sera attribué au patient en fonction du type de document d'identité présenté et de la concordance avec la base INSi :

- **P** : identité provisoire

L'utilisateur n'a pas identifié l'utilisateur sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance et n'a pas créé/modifié l'identité sur la base des retours d'INSi (statut par défaut)

- **Q** : identité qualifiée

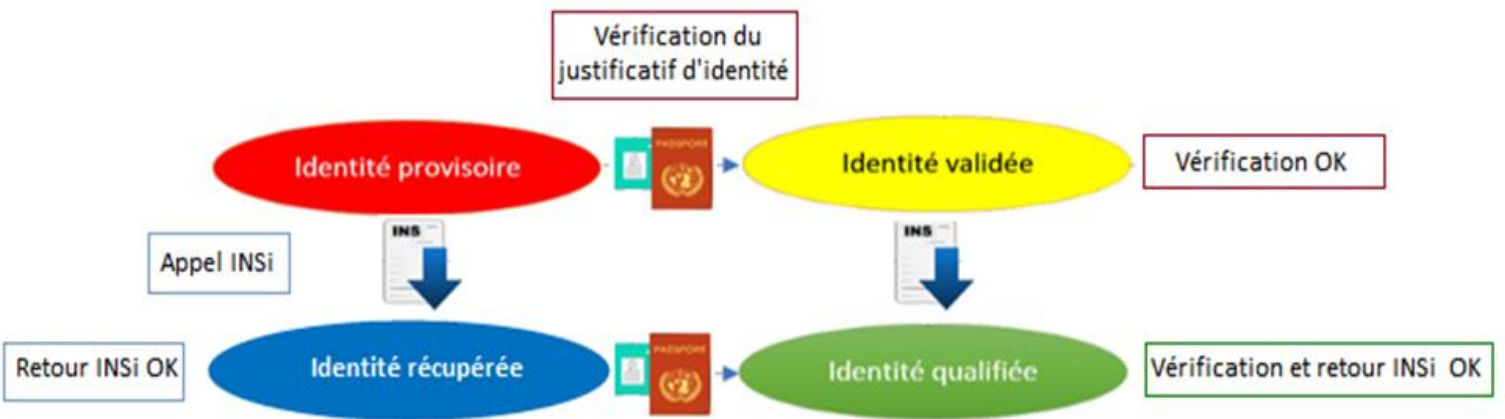
L'utilisateur a identifié l'utilisateur sur la base d'un dispositif à haut degré et a créé/modifié l'identité sur la base des retours d'INSi

- **R** : identité récupérée

L'utilisateur n'a pas identifié l'utilisateur sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance et a créé/modifié l'identité sur la base des retours d'INSi

- **V** : identité validée

L'utilisateur a identifié l'utilisateur sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance et n'a pas créé/modifié l'identité sur la base des retours d'INSi



Le fond du champ apparaît en fonction du statut d'identité INS (qualifié : vert, récupéré : bleu, ...)

Les cas particuliers (exemple : discordance entre 2 documents d'identité) ainsi que les règles d'enregistrement des traits d'identité sont décrits dans le document 5.4-INS068 : « Règles de vérification et d'enregistrement de l'identité des patients ».

Confrontation aux autres sources d'identification et conduite à tenir en cas de discordance : La pièce d'identité retenue par le laboratoire est confrontée aux autres sources d'identification : carte vitale et fiches de suivi médical, prescription médicale. En cas de discordance entre l'identité affichée par la carte vitale et l'identité présente sur l'ordonnance ou sur la fiche de suivi médical, la secrétaire se réfère à l'instruction 5.4-INS019 « Conduite à tenir en cas de discordance carte vitale – identité du patient »

Pour les patients « société » : La secrétaire reprend exactement les données démographiques saisies par les secrétaires du 3^{ème} étage. Ces dernières ont été formées à la procédure d'identitovigilance du laboratoire et suivent les mêmes règles de vérification et d'enregistrement de l'identité des patients (document Kalilab 5.4-INS068).

Enregistrer les patients dans la base « Patients » de Kalisil.

ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

A l'enregistrement du dossier une planche d'étiquettes est éditée par dossier patient.

Chaque étiquette comprend les données suivantes :

- Nom d'usage
- Prénom
- Sexe
- Date de naissance
- Numéro identifiant unique
- En fonction des analyses, peuvent également figurer : les analyses demandées, le nom de l'automate, le code barre, le nom de naissance, le nom du préleveur.

AU PRELEVEMENT

Le préleveur appelle dans la salle d'attente, le nom figurant sur la planche d'étiquette, en cas d'homonymie le prénom est précisé.

Dans la salle de prélèvement, le préleveur s'assure qu'une seule fiche de prélèvement est présente en salle de prélèvement ; il vérifie l'identité du patient (nom d'usage, de naissance, prénom, date de naissance) figurant sur la planche d'étiquettes en les faisant dire par le patient lui-même puis en vérifiant avec lui l'orthographe.

Dans le cas du groupe sanguin, le patient est prié d'épeler son nom d'usage, prénom, nom de naissance et date de naissance. Le préleveur écrit ces données ainsi que le sexe du patient manuellement et de façon lisible sur l'étiquette dédiée au tube de Groupe sanguin.

Ensuite, le préleveur identifie les échantillons devant le patient avec les étiquettes. Il trace la vérification de l'identité en cochant la case prévue à cet effet sur la fiche de suivi médical ou en la notant sur la prescription du CMETE.

En cas de discordance entre l'identité déclarée par le patient et avec celle saisie dans le SIL, le préleveur demande la présentation de la pièce d'identité. Une rectification au niveau du secrétariat est éventuellement réalisée. Dans le cas d'un patient « société », le secrétariat du 3^{ème} étage en est informé. S'il y a une non-conformité, celle-ci sera enregistrée selon la procédure des non-conformités « 4.9-PR002 ».

S'il y a une non-conformité, Celle-ci sera enregistrée selon la procédure des non-conformités « 4.9-PR002 ».

EN TECHNIQUE

Pour les demandes de groupes sanguins ou de RAI, les techniciens procèdent en zone technique à un contrôle de l'identité du patient en vérifiant la concordance entre les données d'identité transmises par le SIL et les informations figurant sur l'étiquette du tube : Se référer au Mode Opérateur 5.5-MO020 « Mode Opérateur WADIANA »

Dans le cas où il n'y a qu'un seul tube pour deux postes différents (un seul tube à partager pour deux automates), les techniciens passent le tube dans un premier automate, puis collent l'étiquette du deuxième automate par-dessus l'étiquette déjà présente sur le tube en vérifiant le nom, le prénom et la date de naissance. Néanmoins, les techniciens doivent laisser visible le nom, prénom et date de naissance de la première étiquette afin de pouvoir justifier de la bonne identité.

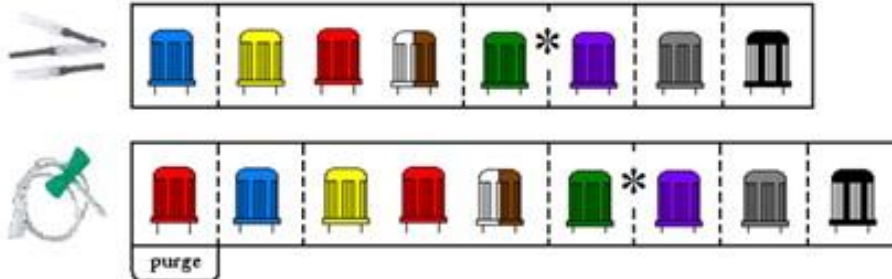







Pour les analyses réalisées en technique manuelle, les techniciens vérifient avant chaque analyse le nom et le prénom présent sur l'échantillon par rapport aux identités présentes sur les feuilles de travail du poste listant les numéros de dossiers par analyse.




Après l'analyse, les échantillons sont conservés conformément à la procédure 5.7-PR002. Ces échantillons pourront servir également à des fins d'identitovigilance

CHOIX, ORDRE ET TEMPS D'AGITATION DES TUBES

5.4-INS031

CHOIX, ORDRE ET RETOURNEMENT DES TUBES

Personnel concerné	Préleveurs : Techniciens de laboratoire, infirmières et biologistes							
Ordre des tubes	 <p>*Les tubes quantiferons sont à prélever après le tube héparinate de lithium et avant le tube EDTA</p>							
Choix des tubes	Se référer au catalogue des analyses du laboratoire (5.4-INS007) et guide des analyses des sous-traitants pour les examens envoyés.							
Retournement Des tubes	 Activateur de coagulation + gel	 Activateur de coagulation avec ou SANS gel	 sang total EDTA	 Tubes citrates pour VS	 Héparine de lithium	 Citrate de sodium	Autres tubes : Aprotinine, K2 EDTA 10. Smg...	6 à 8 fois
Tubes Quantiferon 							agiter 10 fois avec suffisamment de fermeté pour que le sang recouvre toute la surface intérieure du tube	

<p>AVV simple Sans protocole</p>	 <p><u>A tout cela il convient d'ajouter :</u></p> <p>Si patient sous anticoagulant ou problème de plaquettes ou société ORANO/AREVA, FRAMATOME, IPEV, AFD</p>  <p>=> prendre un tube citrate de coagulation</p> <p>Si antécédent de diabète ou société AIR LIQUIDE, TRANSOCEAN</p>  <p>=> prendre un tube EDTA</p>
<p>Patient avec prescription CMETE ou extérieure</p>	<p>Se référer au catalogue des analyses du laboratoire (5.4-INS007) pour les analyses réalisées au laboratoire et au guide des analyses des sous-traitants pour les examens envoyés.</p>

DEMANDES TRAITÉES PAR LE LABORATOIRE

- Prescription provenant d'un Médecin du CMETE
- Prescription pour les patients AVV (avant visite) 5.4-ENR010. Le prélèvement est effectué selon le bilan standard du CMETE.
- Fiche protocole selon la société adhérente
- Ordonnance médicale d'un Médecin de ville
- Ordonnance des Médecins du travail
- Demande personnelle du patient (sans prescription médicale)
- Analyse supplémentaire demandée par le patient ou le prescripteur au biologiste
- Echantillons prélevés à l'extérieur du laboratoire

Le laboratoire permet la dispense des frais sur présentation d'une prescription médicale, de la carte vitale et de la carte mutuelle en cours de validité et reconnue par le concentrateur.

Ces documents sont conservés selon la procédure en vigueur 4.13.PR001 « gestion des enregistrements et archivage »

CRITERES D'ACCEPTATION

- **Prescription du CMETE : Fiche navette**

- ⇒ **Patients ayant déjà vu le médecin**

Elle devra comporter au minimum les éléments suivants :

- Nom du médecin
- Les analyses à prélever
- Nom, prénom et date de naissance du patient

- ⇒ **Patients étant en attente du médecin : patients en Avant Visite (AVV)**

Le patient descend avec un protocole de prélèvement dépendant de sa société (chaque société adhérente ayant ses propres besoins)

Elle comporte :

- Les analyses à prélever
- Nom, prénom et date de naissance du patient

En cas exceptionnel d'absence de feuille de protocole émise par le troisième étage (problème d'imprimante, retard...) il est utilisé à la place la fiche AVV 5.4-ENR010.

- **Ordonnance médicale**

Elle devra comporter au minimum les éléments suivants avec une homogénéité d'écriture (afin de s'assurer qu'aucun élément n'a été rajouté par le patient) :

- Nom, numéro Finess, adresse.
- Date de la prescription.
- Nom, prénom et date de naissance du patient. L'identité du patient doit correspondre à celle de l'ordonnance (vérification par la carte de sécurité sociale).
- Analyses demandées.
- Signature du prescripteur

- Tampon du prescripteur
- Eventuellement : numéro de téléphone et / ou de fax du prescripteur

Conformément au décret 2002-660, lorsque le prélèvement est effectué par un professionnel de santé, l'ordonnance devra être accompagnée d'une fiche de transmission de prélèvement (5.4-ENR018).

L'acceptation de l'ordonnance vaut revue de contrat. La saisie du dossier dans l'informatique est la traçabilité de cette revue. Un scan de l'ordonnance est conservé afin d'assurer l'exactitude de la saisie du dossier.

VERIFICATION DE L'IDENTITE

La vérification de l'identité s'effectue selon la procédure 5.4-PR002 « Identitovigilance »

ANALYSES DEMANDEES

Certaines analyses nécessitent le respect d'exigences particulières au moment du prélèvement. Les conditions de prélèvement doivent donc être respectées. Des préconisations pour le patient sont disponibles à l'accueil, ainsi que la liste des analyses nécessitant l'obtention de renseignements particuliers (5.4-ENR014) sont disponibles sur logiciel documentaire.

D'autre part si une modification de prescription est nécessaire (bonnes pratiques, incompatibilités d'actes à la nomenclature...), seul le biologiste médical est habilité pour réaliser cette modification qui sera tracée dans le dossier du patient. Le biologiste veille à obtenir l'accord du prescripteur (sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité).

CAS PARTICULIERS DES AVANT-VISITES

Le patient, déjà prélevé, revient de sa consultation avec la fiche navette. La concordance entre la nature des tubes de prélèvement et les analyses demandées est vérifiée.

INFORMATIONS A DONNER AU PATIENT LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE SA DEMANDE

Au niveau de la réception du laboratoire :

La secrétaire indique au patient la nature des prélèvements (sanguin, cutané, génital...), elle précise au patient si les analyses vont être effectuées au sein de notre laboratoire ou si elles seront traitées dans un laboratoire sous-traitant, elle signale les analyses classées hors nomenclature.

Si le patient doit effectuer lui-même un prélèvement, la secrétaire lui remet les récipients de recueil ainsi que les fiches de recommandations à suivre pour une réalisation correcte des prélèvements.

Pour chaque demande d'analyse formulée oralement, se référer au paragraphe 4.10.a).

La secrétaire de l'accueil informe le patient sur le montant à régler.

Dans la salle de prélèvement :

Le préleveur (ou la préleveuse) présente au patient le déroulement du prélèvement, en particulier pour les prélèvements bactériologiques, afin d'obtenir le consentement oral du patient. Le préleveur indique également au patient le délai ainsi que les modalités de rendu des résultats.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Les renseignements cliniques sont recueillis au moment du prélèvement et notés sur la fiche de suivi médical pour chaque patient « sécurité sociale ».

Pour les patients « société », les renseignements ne sont pas collectés par le préleveur car ceux-ci sont disponibles sur les dossiers informatiques du Centre Médical (consultables par les biologistes)

CONTROLE DES ANALYSES

Les codes d'analyses sont vérifiés par le préleveur en salle de prélèvement avant le prélèvement du patient, ainsi que par le technicien à la paillasse du tri. La secrétaire vérifie les documents (analyses, médecins, préleveur...) et les scannent.

TRAITEMENT DE L'URGENCE

Lorsque la **notion d'urgence** est notée sur l'ordonnance, signalée oralement par le patient, le prescripteur ou le préleveur, ou enregistrée sur la fiche de suivi médical 5.4-ENR016, les actions suivantes sont déclenchées :

- Le dossier est saisi dans l'informatique avec le **code urgence**.
- Le prélèvement est alors identifié avec un **marquage (surligneur)**. Il est transmis immédiatement en technique et traité en priorité. **La secrétaire prévient le biologiste et la technicien**. Dans le cas où il y aurait 2 dossiers (urgent et non urgent) pour le laboratoire sous-traitant, prévoir des tubes dans chaque sachet sauf difficulté de prélèvement, auquel cas, une décantation sera nécessaire.
- **A chaque paillasse, le technicien prévient le biologiste dès validation des analyses dont il a la charge.**
- Régulièrement, la secrétaire rappelle au biologiste la présence de l'urgence.
- Après validation biologique, **le biologiste communique les résultats** au prescripteur dans les délais prévus selon l'instruction.

Cas des urgences administratives pour les patients des sociétés adhérentes :

Un traitement en urgence des analyses peut être demandé pour certains patients des sociétés adhérentes dans le cadre d'une urgence administrative et non d'une urgence médicale (départ imminent, demande de visa en cours). Ces demandes sont alors saisies dans l'informatique avec le code URG2. Elles sont identifiées par un marquage surligneur et traitées rapidement.

CAS PARTICULIERS

a) Cas où un patient se présente sans prescription ou Prescription orales d'examen

- En l'absence d'ordonnance, la secrétaire demande au biologiste de vérifier avec le patient la pertinence du/des analyses demandées . L'acceptation de la demande par le biologiste est tracée dans le SIL avec le code SO.
La secrétaire fait remplir par le patient une « Fiche de consentement » (5.4-ENR015), cette fiche comprend :
 - Identification complète du patient (nom, prénom, date de naissance, sexe)
 - Le nom du médecin à contacter en cas de résultats perturbés
 - La liste des analyses demandées par le patient :
 - Le montant des analyses à régler
 - La date
 - La signature du patient

Enregistrer ensuite le dossier

Le patient est informé que cette demande ne peut être prise en charge par la sécurité sociale, des conditions de prélèvement, de réalisation de l'analyse et du délai de rendu des résultats.

- Un prescripteur demande à ce que des analyses soient ajoutées à une prescription existante pour un de ses patients :

Il sera demandé au prescripteur une nouvelle ordonnance avec la prescription supplémentaire et on l'informerait que cela peut entraîner un nouveau prélèvement si les analyses ne peuvent être réalisées sur les échantillons déjà prélevés pour des raisons de délai de conservation, de quantité ou de qualité des échantillons prélevés, etc.

En cas de nouveau prélèvement un nouveau dossier sera créé, sinon les analyses seront ajoutées au dossier existant avec d'éventuelles mentions de réserves (analyses réalisées sur prélèvement conservé par exemple).

Selon les cas on s'assurera de l'accord du patient (analyses HN par exemple) cf : 5.4-ENR015

b) Prescriptions d'analyses hors nomenclature

Un formulaire d'acceptation est signé par le patient (cf : 5.4-ENR015).

c) Prélèvement effectué par un professionnel de santé

Conformément au décret 2002-660, lorsque le prélèvement est effectué par un professionnel de santé, l'ordonnance devra être accompagnée d'une fiche de transmission de prélèvement (5.4-ENR018)

d) Patients mineurs

- pour les mineurs (<18 ans), aucune analyse ne peut être réalisée sans ordonnance (même avec le consentement d'un représentant légal)
- sur présentation d'une ordonnance : La présence d'un parent est obligatoire pour toutes les analyses sauf celles qui ont trait aux MST, la contraception ou les interruptions volontaires de grossesse

e) Médecine du travail

Les dossiers prescrits par un médecin du travail seront enregistrés hors prise en charge Assurance maladie/mutuelle.

Pour les médecines du travail en partenariat avec le CMETE, un code transmetteur "DRS" est saisi et la facturation sera assurée par le service Comptabilité du CMETE.

Pour les autres médecines du travail, les dossiers sont enregistrés avec le code transmetteur correspondant au service demandeur. Une facture sera adressée directement à la médecine du travail par le service secrétariat.

f) Compagnie d'assurance

Les dossiers émanant d'une compagnie d'assurance seront enregistrés hors prise en charge Assurance maladie/mutuelle. En ce qui concerne les modalités de remise des résultats, se reporter à la procédure 5.9-PR001

g) Demandes de la préfecture

Les dossiers émanant de la préfecture seront enregistrés hors prise en charge Assurance maladie/mutuelle. En ce qui concerne les modalités de remise des résultats, se reporter à la procédure 5.9-PR001

h) Analyses prescrites en double

Lorsqu'un patient se présente avec 2 ordonnances avec des analyses en doublon :

-si les analyses sont réalisées en interne, il faut créer 2 dossiers différents, saisir les analyses dans chaque dossier, mettre en gratuit les analyses en double pour une des 2 prescriptions. Le technicien pourra transférer les résultats d'un dossier à l'autre avec un clonage « syslam ».

-Pour les analyses transmises au laboratoire cerba, la secrétaire créera un troisième dossier avec les 2 prescripteurs et uniquement les analyses transmises en double

i) Traitement d'une demande d'anonymat

Lorsqu'un patient demande l'anonymat, le nom et le prénom du patient sont remplacés par un code constitué de la manière suivante:

Nom à enregistrer = 3 premières lettres du Nom+AN

Prénom à enregistrer = Prénom du patient

Ce code se substituera aux nom et prénoms du patient dans tous les documents du laboratoire (y compris la fiche de suivi médical).

En cas de remise des résultats au laboratoire, une carte du laboratoire est remise au patient sur laquelle est collée son étiquette d'identification. Il lui est précisé qu'aucun résultat ne pourra lui être remis sans présentation de cette carte.

Exemple :

Mr DUPONT patrice

Code anonymat : nom =DUPAN prénom = patrice

Code : DUPANPAT

j) Analyses génétiques

Certaines analyses génétiques nécessitent le consentement éclairé écrit du patient. Celui-ci sera exigé avant le prélèvement ; il sera scanné dans le dossier du patient et transmis au laboratoire sous-traitant avec le prélèvement.

NON-CONFORMITE

La secrétaire ouvrira une non-conformité dans le SIL devant toute anomalie détectée à son niveau : prescription non conforme, anomalies liées aux conditions pré-analytiques (patient sous antibiothérapie pour prélèvement bactériologique...).

Cas particulier des patients non à jeun, la secrétaire saisit le code NAJ.

Pour les anomalies liées à la prescription ou à la fiche de transmission de prélèvement : la secrétaire se réfère à l'instruction 5.4-INS023.

Toute non-conformité est enregistrée et traitée selon l'instruction 4.9-INS003.

CRITERES D'ACCEPTATION ET DE REJET DES ECHANTILLONS

5.4-INS024

Critères vérifié	Responsable du contrôle	Détection d'une NC	Conduit à tenir + Décision	Enregistrement d'une Non-conformité (NC)
Heure de prélèvement	Technicien	Délai de transmission trop important	Dans le cas d'un échantillon précieux (nature du prélèvement, nourrisson, urgence absolue, prise d'antibiotique pour examen bactériologique)...se référer au biologiste . REJET -> NC si précieux : ACCEPTÉ +dérégation du biologiste	OUI
Conditions de transport	Technicien	Températures préconisées non respectées	REJET de l'échantillon-> NC si précieux (hors hémostase et tests avec milieux spécifiques ex :homa, actd...) : ACCEPTÉ +dérégation du biologiste	OUI
Identification de l'échantillon	Préleveur /Techniciens	<p>1/ Tubes non étiquetés</p> <p>2/ Absence de nom sur les tubes ou nom illisible</p>	REJET de l'échantillon -> NC	OUI
		<p>1/ Groupe sanguin / RAI : (nom, prénom, DDN...)</p> <p>2/ Absence du nom de jeune fille pour les groupes sanguins, renseignements incomplets ou mauvaise transcription manuscrite</p>	1/ ACCEPTÉ sous réserve de l'obtention des informations manquant. 2/ sinon : REJET	1/ NON 2/ OUI
Adéquation échantillon /modalités de prélèvements	Technicien / Préleveurs/ Secrétaires	Inadéquation entre le type de tube et l'analyse demandé	Si l'analyse peut être réalisé sur un autre contenant du même patient, prélevé le même jour -> ACCEPTÉ . Si l'analyse ne peut pas être réaliser -> REJET + NC demande d'un nouveau prélèvement	OUI
		Recueil des urines de 24h non fait ou non conforme	Echantillon rejeté : REJET , demande d'un nouveau recueil + NC si analyse déjà enregistrée dans le dossier	OUI seulement si analyse déjà enregistré dans le dossier
		Acheminement des prélèvement fait à domicile (copro/ECBU...) non respect des délai ou de la conservation.	Echantillon rejeté : REJET , demande d'un nouveau prélèvement. sauf pour les prélèvements précieux: ACCEPTÉ -> demande de dérogation biologiste + NC	OUI
Quantité d'échantillon	Préleveur /Techniciens	Volume du tube insuffisant	Voir avec la technique si l'analyse est possible si Oui -> ACCEPTÉ si non -> REJET reprélever le patient -> NC	OUI
		Tube surméraire	Vérifier la saisie de l'ordonnance, identifié les tubes et les conserver pendant 24 h.	NON
Qualité de l'échantillon	Techniciens	Tube hémolysé/icterus/lactescent	Utiliser un autre tube non hémolysé/icterique/lactescent si possible	NON
		Tube coagulé pour analyse nécessitant du sang total ou pour échantillon d'hémostase.	Demande d'un nouveau prélèvement -> REJET	OUI
autres critères	Techniciens /Préleveurs	Voir le biologiste		
Renseignements de la fiche individuelle de prélèvement	Préleveurs	Se référer à la fiche d'instruction 5.4-INS023 "contrôle des prescription/fiche de prélèvement"		

TRAITEMENT DES DEMANDES D'ANALYSES SANS PRESCRITPITON ECRITE OU HORS NOMENCLATURE

5.4-ENR015

Ce document permet de tracer les demandes d'analyses formulées oralement ou hors nomenclature

- Demande d'analyses supplémentaires par rapport à une ordonnance existante
- Demande d'analyses sans ordonnance
- Accord pour la réalisation d'analyses hors nomenclature
- Refus d'analyses prescrites (à préciser) :
Le prescripteur en sera informé sur le compte-rendu
- } Visa du biologiste :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : H F

Analyses demandées :

❖

❖

❖

Coller ici une étiquette du dossier

Obligatoire : Médecin à contacter en cas de résultats perturbés :

En signant ce document, je reconnais avoir été informé :

- Des conditions de prélèvement
- Du lieu de réalisation de ces analyses
- Du délai et des modalités de rendu des résultats
- Du montant à payer
- Du fait que ce montant ne pourra pas être pris en charge par la sécurité sociale


Je m'engage à régler le montant de..... correspondant aux analyses citées ci-dessus.

Fait à

Le

Signature

INSTRUCTION DE PRELEVEMENT SANGUIN

 5.4-INS008

Préleveurs	Technicien de laboratoire Infirmier(e) Biologiste
Conditions	A jeun ou non, en fonction des analyses à réaliser. Pour les analyses sous-traitées, se référer au guide des analyses du sous-traitant.
Matériel	Fauteuil de prélèvement Aiguilles sécurisées à usage unique Corps de pompe garrot gants Solution hydro alcoolique Alcool à 70° dénaturé Antiseptique non alcoolique (pour dosage alcoolémie) Coton Pansements Sparadrap Boîte récupératrice d'aiguilles type DASRI Poubelle pour déchets contaminés et poubelle pour déchets non contaminés Tubes Portoir pour tubes Une télécommande est à portée de main de chaque préleveur. Elle déclenche une sonnerie d'alerte en paillasse tri pour demander de l'aide immédiate en cas de malaise d'un patient
Identito vigilance	Se référer à la procédure en vigueur 5.4-PR002 « Identito-vigilance »
Renseignements cliniques	Le préleveur s'enquiert de l'existence d'une éventuelle thérapeutique et des renseignements cliniques (cf. document 5.4-ENR014 « liste des analyses nécessitant des renseignements cliniques) qu'il note sur la fiche de suivi médical (5.4-ENR016). Il s'assure de la conformité des conditions de prélèvement (jeûne, décubitus, etc...)
Délai de rendu des résultats	Il indique au patient les modalités de rendu des résultats en fonction des analyses demandées et selon les cas de prescription (médecine du travail, mineur, assurances etc...).

<p>Prélèvement</p>	<p>Les tubes sont sélectionnés en fonction des analyses prescrites et le système de prélèvement en fonction du système veineux.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pose du garrot et recherche de la veine. • Asepsie de la peau à l'aide d'un coton imprégné de solution antiseptique. • Utilisation d'aiguille stérile à usage unique obligatoire. Le diamètre de l'aiguille doit être compris entre 19 et 23 gauge (impératif pour coag). • Utiliser les tubes à prélèvement en fonction des analyses prescrites et dans l'ordre décrit dans la procédure 5.4-INS031 « Choix, ordre et retournement des tubes ». Retourner les tubes selon cette même instruction. • Desserrer le garrot le plus rapidement possible et l'enlever complètement avant de retirer l'aiguille. La pose ne doit pas excéder 1 minute pour les analyses de coagulation. • Retirer l'aiguille tout en comprimant la veine avec un coton. • Le patient assure la compression pendant 2 à 3 minutes. • Pendant ce temps, la préleveuse étiquette les tubes devant le patient. • Pose du pansement avec petit coton en dessous pour faire compression.
<p>Transport conservation</p>	<p>Les tubes sont récupérés toutes les heures par les techniciens, conservés verticalement dans de la mousse antichoc et amenés en technique ou à la paillasse de tri.</p> <p>Les urgences sont collectées rapidement par les techniciens ou amenés par la préleveuse le cas échéant.</p>
<p>Elimination des déchets</p>	<p>Les cotons souillés sont jetés dans une poubelle, elle-même transvasée dans un container DASRI. Quant aux aiguilles elles sont directement éliminées dans le container DASRI prévu à cet effet.</p>

INSTRUCTION DE PRELEVEMENT VAGINAL

5.4-INS002

<p>Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Instruction de prélèvement vaginal</p>	<p style="text-align: right;">5.4-INS002 V07 Version : 7 Applicable le : 18-08-2025</p>
---	--	--

Préconisations :

- Pas de rapport sexuel dans les 24h précédant l'examen
- hors période de règles
- Sans traitement ATB, antifongique (ovule) 5 jours minimum avant le prélèvement (15 jours pour les chlamydiae)
- Eviter toute toilette intime, traitement local (crème, gel, savon) avant le prélèvement

Prélèvement :


Installer la patiente en position gynécologique

- Préparer les écouvillons à prélever en fonction du tableau ci-dessous :
- Mettre des gants
- Placer le spéculum de façon à visualiser le col de l'utérus (ne pas utiliser de gel lubrifiant)

Préleveurs	Biologiste : Diplôme de Médecin ou de Pharmacien Biologiste ou IDE	
Type de germe	Matériel	Etapas
Germes banaux	Ecouvillon ESWAB	Ecouvillonnage du vagin et du col : 1 écouvillon (Recueillir les sécrétions, et insister au niveau des lésions éventuelles)
PCR Chlamydia trachomatis - Gonocoque – Mycoplasmes, Trichomonas (endocol)	Kit spécifique fourni par le laboratoire sous-traitant : milieu APTIMA avec 1 écouvillon Mycoplasme : les milieux A3 medium sont fournis par CERBA et stockés au congélateur C11.	Retirer les glaires cervicales au préalable puis prélever en endocervical (ou autour du col et dans le cul de sac vaginaux) avec l'écouvillon
Herpes (Lésion Vulvo-vaginale) :PCR ou culture	Kits de prélèvement : M4RT-UTM03 : Virus culture et PCR (CERBA)	Frotter l'écouvillon fin au niveau de la zone à prélever ou recueillir les sérosités d'une vésicule pour la recherche d'herpès Décharger / casser l'écouvillon dans le milieu de transport Bien refermer le flacon.
Transport conservation	Les échantillons sont transmis en salle de tri et traités pour l'envoi chez CERBA ou Cerballiance WILSON via SAINT QUENTIN MAGENTA .	
Identito-vigilance	Chaque milieu de recueil ainsi que la fiche de travail doivent comporter une étiquette-patient	
Elimination des déchets	Tout déchet contendant est éliminé dans les boites « à aiguilles » Les déchets potentiellement contaminés sont évacués en DASRI	

INSTRUCTION D'AUTO PRELEVEMENT VAGINAL

5.4-INS044

Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS	Instruction d'auto-prélèvement vaginal	5.4-INS044 V03 Version : 3 Applicable le : 16-08-2024 
---	---	---

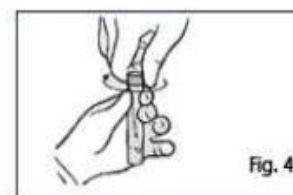
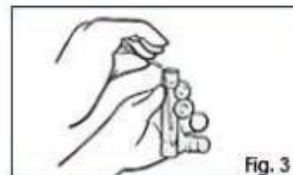
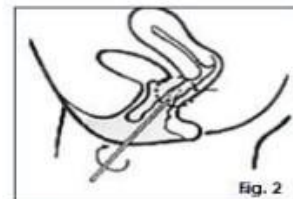
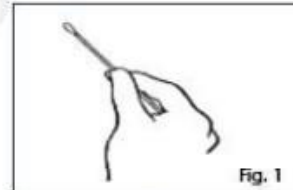
Préconisations :

- Pas de rapport sexuel dans les 24h précédant l'examen
- hors période de règles
- Sans traitement ATB, antifongique (ovule) 5 jours minimum avant le prélèvement (15 jours pour les chlamydiae)
- Eviter toute toilette intime, traitement local (crème, gel, savon) avant le prélèvement


Prélèvement :



- S'installer dans la salle de gynécologie
- **SE LAVER LES MAINS AVANT DE REALISER L'AUTO-PRELEVEMENT**

Préleveur	Patient
Etapes	Description
1	Ouvrez l'emballage contenant l'écouvillon. Ne touchez pas le coton et ne le laissez pas tomber - Si le coton est touché ou si l'écouvillon est tombé, demandez un nouveau kit de prélèvement.
2	Enlevez l'écouvillon de l'emballage
3	Tenez l'écouvillon comme le montre la figure 1 , en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige.
4	Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance d'environ 3 cm (cf. figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes . Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
5	Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.
6	Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube . Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
7	Placez immédiatement l'écouvillon dans le milieu de transport de façon à ce que le bout de l'écouvillon soit visible en dessous de l'étiquette.
8	Cassez précautionneusement la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord du tube comme le montre la figure 3 .
9	Resserrez fermement le bouchon sur le tube (cf. figure 4).
10	1. Identifiez le tube avec votre nom / prénom/ date de naissance



INSTRUCTION DE PRELEVEMENT URETRAL

 5.4-INS003

 <p>Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Instruction de prélèvement urétral</p>	<p>5.4-INS003 V06 Version : 6 Applicable le : 25-08-2023</p> 
--	--	---



Installer le patient en position allongée ou assise ;

- Préparer les écouvillons à prélever en fonction du tableau ci-dessous :
- Mettre des gants

Préleveurs	Biologiste : Diplôme de Médecin ou de Pharmacien Biologiste.	
Type de germe	Matériel	Étapes
Germes banaux	Ecouvillon Swab	En cas d'écoulement urétral, avant toute chose recueillir sur une lame, une goutte de sécrétion directement au niveau du méat urinaire Introduire l'écouvillon dans l'urètre et effectuer de petits mouvements de rotation (2 écouvillons) Réaliser un étalement sur lame à partir d'un des écouvillons (dérouler l'écouvillon)
PCR Chlamydia trachomatis - Gonocoque - Mycoplasmes, Trichomonas Herpes (lésion génitale)	Kit spécifique fourni par le laboratoire sous-traitant : milieu ESWAB avec 1 écouvillon Mycoplasme : les milieux A3 medium sont fournis par CERBA et stockés au congélateur C11. Kits de prélèvement : M4RT-UTM03 : Virus culture et PCR (CERBA)	Introduire l'écouvillon fin dans l'urètre et effectuer de petits mouvements de rotation Frotter l'écouvillon fin au niveau de la zone à prélever ou recueillir les sérosités d'une vésicule pour la recherche d'herpès Décharger / casser l'écouvillon dans le milieu de transport Bien refermer le flacon
Transport conservation	Les échantillons sont transmis en salle de tri et traité pour l'envoi chez CERBA ou Cerballiance WILSON via SAINT QUENTIN MAGETNA .	
Identito vigilance	Chaque écouvillon ainsi que la fiche de travail doit comporter une étiquette-patient	
Élimination des déchets	Tout déchet contenant est éliminé dans les boîtes « à aiguilles » Les déchets potentiellement contaminés sont évacués en DASRI	

PRECONISATIONS PATIENT POUR LA RECHERCHE DE CHLAMYDIAE/MYCOPLASMES

5.4-INS063

 Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS	Préconisations patient pour la recherche de chlamydiae/mycoplasmes	5.4-INS063 V01 Version : 1 Applicable le : 23-08-2024 
---	---	---

Prélèvement urinaire:

Le recueil s'effectue de préférence sur les urines du matin, avant toute émission d'urine ou 3 heures après la dernière miction (tolérance maximum en fonction du contexte: 1h après la dernière miction) ;

le patient ne doit pas être nécessairement à jeun, pas de prise d'antibiotique (au moins 15 jours).

Pour les femmes: Pas de recueil pendant les règles.

Protocole :

Effectuer un lavage hygiénique des mains (avec du savon ou une solution hydro alcoolique) ;

Pas de toilette locale

Uriner le 1er jet d'urine dans le flacon ; ne pas remplir le flacon (20-30 ml maximum)□

Refermer soigneusement le flacon ;

Noter sur l'étiquette vos nom, prénom, date de naissance

La date et l'heure du recueil vous seront demandées lors de l'enregistrement du dossier.

Rapporter le plus rapidement possible le flacon au laboratoire. Il peut être conservé au réfrigérateur (+ 4 °C pendant 2 heures).

Autres sites de prélèvement :


Pour les prélèvements vaginaux : Pas de recueil pendant les règles.

Le contrôle après traitement se fait au moins 15 jours après l'arrêt de l'antibiothérapie;

Le prélèvement vaginal, anal et prélèvement de gorge peuvent se réaliser en auto-prélèvement au laboratoire après un lavage des mains (avec du savon ou une solution hydro alcoolique) et absence de toilette locale.


INSTRUCTION D AUTOPRELEVEMENT ANAL ET GORGE POUR RECHERCHE DE CHLAMYDIAE/MYCOPLASMES

5.04-INS064


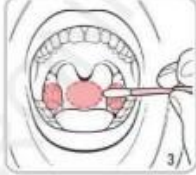
Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS	Instruction d'auto-prélèvement anal et gorge pour recherche de chlamydia/mycoplasmes	5.4-INS064 V01 Version : 1 Applicable le : 30-08-2024 
---	---	---



① Se laver les mains avant le recueil, se déshabiller si nécessaire et s'installer dans une position confortable.

② Ouvrir l'emballage, retirer le tube de prélèvement, et prendre l'écouvillon (ne pas l'humidifier).

 *Le milieu liquide contenu dans le tube de prélèvement peut entraîner des irritations en cas de contact avec la peau ou d'autres parties du corps. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de renversement, nettoyer D'ABORD avec détergent / eau et puis avec de l'eau de Javel.*

③ Réaliser le prélèvement selon les consignes ci-dessous, en fonction de la nature du prélèvement :

Ano-rectal (écouvillon bleu) Introduire doucement l'écouvillon dans le rectum à environ 3 à 5 centimètres, et le tourner délicatement pendant 5 à 10 secondes. Retirer l'écouvillon sans toucher aucune surface. 	Pharyngé (écouvillon blanc) Face à un miroir, frotter l'écouvillon sur les amygdales (ou les côtés en cas d'amygdalectomie) ainsi que sur le fond de la gorge, comme sur la photo ci-dessous. En cas de difficulté, le prélèvement sera effectué par un personnel habilité. 
--	--

Chlamydia	Mycoplasmes
	
<ol style="list-style-type: none"> 1- Ouvrir le tube en dévissant le bouchon avec la main qui tient l'écouvillon 2- Placer immédiatement l'écouvillon dans le tube de transport. Casser délicatement la tige de l'écouvillon au niveau de la ligne de cassure contre la paroi du tube et jeter immédiatement la partie supérieure. 3- Laisser l'écouvillon dans le tube et visser hermétiquement le tube à l'aide du bouchon. 	<p>- Replacer avec précaution l'écouvillon dans son emballage</p>

④ Identifier le prélèvement (**nom naissance, prénom, date de naissance et sexe**), à la main ou à l'aide des étiquettes fournies par le laboratoire.

Prévenir le laboratoire de tout incident ou difficulté rencontré(e) lors du prélèvement.

1/1

INSTRUCTION DE PRELEVEMENT ORL

📄 5.04-INS005

<p>Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Instruction prélèvement ORL</p>	<p>5.4-INS005 V05 Version : 5 Applicable le : 28-05-2024</p>
--	---	---

Préleveurs	Biologiste : Diplôme de Médecin ou de Pharmacien Biologiste, IDE	
Type de prélèvement	Matériel	Etapas
Prélèvement pharyngé	Gants Eswab blanc ou rose	Demander au patient d'ouvrir la bouche et d'abaisser la langue de façon à visualiser correctement l'oropharynx et les amygdales. Frotter le ou les écouvillons sur la surface de chaque amygdale, sur la muqueuse pharyngée au niveau des zones inflammatoires ou nécrotiques, à la périphérie des fausses membranes si présentes Eviter de toucher la langue, la luette et la paroi postérieure du pharynx Insérer les écouvillons dans le milieu de transport si ensemencement différé
Prélèvement buccal		Demander au patient d'ouvrir la bouche. Frotter le ou les écouvillons sur la muqueuse buccale. Insérer les écouvillons dans le milieu de transport si ensemencement différé
Prélèvement nasal		Par narine : Passer les 2 écouvillons au niveau de la partie antérieure de la fosse nasale <i>L'écouvillon doit être dirigé en haut et en avant.</i> Insérer les écouvillons dans le milieu de transport si ensemencement différé
Prélèvement auriculaire		Par conduit externe Passer 1 à 2 écouvillons au niveau du conduit externe
Prélèvement ophtalmique		Par œil. Frotter 1 à 2 écouvillons (fins) sur l'angle interne de l'œil au niveau du cul de sac du canal lacrymal ;
Prélèvement de langue		Frotter 1 à 2 écouvillons sur la surface de la langue sans oublier les bords latéraux ou en présence de lésion patente frotter la surface de la lésion
Transport conservation		Les échantillons sont transmis en salle de tri et traité pour l'envoi chez CERBA ou Cerballiance WILSON via SAINT QUENTIN MAGETNA .
Identito-vigilance	Chaque milieu de recueil ainsi que la fiche de travail doivent comporter une étiquette-patient	
Elimination des déchets	Tout déchet contenant est éliminé dans les boites « à aiguilles » Les déchets potentiellement contaminés sont évacués en DASRI	

INSTRUCTION DE PRELEVEMENT M POX

5.04-INS061

<p style="text-align: center;">Laboratoire du C.M.E.T.E CMETE 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Instruction de prélèvement M POX par PCR</p>	<p>5.4-INS061 V02 Version : 2 Applicable le : 17-03-2025</p>
---	--	--

Préleveurs	Biologiste : Diplôme de Médecin ou de Pharmacien Biologiste, infirmières IDE		
Lieu de prélèvement	1 ^{er} étage dans la pièce dédiée		
Type de patients	Matériel	Nature du prélèvement	Etapes
Patients symptomatiques (éruption cutanée ou lésion sur la muqueuse génitale, anale, buccale, précédée ou accompagnée d'une fièvre >38°C, ou d'adénopathies ou de douleurs de déglutition)	-Gel hydroalcoolique -Surfanios en Spray -Matériel de protection pour le préleveur : surblouse, masques FFP2, gants, lunettes de protection ou visière. -Container DASRI -2 kits prélèvement (1 écouvillon + 1 milieu de transport M4RT)	Prélèvement au niveau de la lésion ET prélèvement oropharyngé	<ul style="list-style-type: none"> - Le préleveur s'équipe d'une surblouse, d'un masque FFP2, de lunettes de protection ou d'une visière, et d'une paire de gants - Faire asseoir le patient - Remplir la fiche de suivi médical (identitovigilance, nom du préleveur, heure de prélèvement,...) - Compléter la fiche Médicale de Prescription Cerba Mpox avec l'aide du patient - Réaliser un prélèvement au niveau des lésions, en frottant plusieurs lésions et au niveau de l'oropharynx, à l'aide de l'écouvillon - Insérer l'écouvillon dans le milieu de transport. Tourner l'écouvillon contre les parois du flacon. Eliminer l'écouvillon dans la boîte Dasri. - Revisser le bouchon du flacon de transport et homogénéiser. Faire sortir le patient de la pièce où a été réalisé le prélèvement - Nettoyer les surfaces ayant été en contact avec le patient à l'aide du surfanios en spray - Enlever dans cet ordre : les gants puis la surblouse, faire une friction des mains avec un gel ou solution hydroalcoolique puis enlever les lunettes et le masque - Se laver les mains - Finir par une friction des mains au gel/solution hydroalcoolique
Patients non symptomatiques	-Gel hydroalcoolique -Surfanios en Spray -Container DASRI -1 kit prélèvement (1 écouvillon + 1 milieu de transport M4RT)	Prélèvement oropharyngé	<ul style="list-style-type: none"> - Faire asseoir le patient - Remplir la fiche de suivi médical (identitovigilance, nom du préleveur, heure de prélèvement,...) - Compléter la fiche Médicale de Prescription Cerba Monkeypox avec l'aide du patient - Réaliser un prélèvement au niveau de l'oropharynx à l'aide de l'écouvillon - Insérer l'écouvillon dans le milieu de transport. Tourner l'écouvillon contre les parois du flacon. Eliminer l'écouvillon dans la boîte Dasri. - Revisser le bouchon du flacon de transport et homogénéiser Faire sortir le patient de la pièce où a été réalisé le prélèvement - Nettoyer les surfaces ayant été en contact avec le patient à l'aide du surfanios en spray - Se laver les mains - Finir par une friction des mains au gel/solution hydroalcoolique
Transport conservation			Le tube contenant l'écouvillon est acheminé en zone technique
Identito-vigilance			Chaque tube de transport dans lequel se trouve l'écouvillon doit porter une étiquette-patient
Elimination des déchets			Les déchets potentiellement contaminés sont évacués en DASRI

INSTRUCTION DE PRELEVEMENT MYCOLOGIQUE

5.04-INS039



<p>Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Instruction de prélèvement mycologique</p>	<p>5.4-INS039 V08 Version : 8 Applicable le : 13-03-2028</p>
--	--	---

Préleveurs	Biologiste : Diplôme de Médecin ou de Pharmacien Biologiste ou IDE
Conditions	Effectuer le prélèvement en l'absence de tout traitement antifongique ou de cosmétique Délai après arrêt du traitement antifongique (crème, vernis) : Lésions → 15 jours, ongles → 3 mois Délai après retrait de crème ou vernis cosmétique : 48 heures
Matériel	Gants Drap d'examen Kit de prélèvement mycologique désinfecté scellé comprenant : Ciseaux à ongles Ciseaux Pince Curette Vaccinostyle Boîte de Pétri Ecouillons Sérum physiologique en dosettes
Etapes	<p>- Lésions : En cas d'application de crème antifongique, respecter un délai de 15 jours avant de prélever. Prélever les squames à l'aide d'un vaccinostyle ou d'une lame porte objet. Sur la peau, toujours prélever en périphérie de la lésion. Récupérer les squames en boîte de Pétri. En présence d'une lésion suintante, écouillonner ou percer les vésicules ; En cas de lésion sèche, humidifier l'écouvillon avec le sérum physiologique stérile.</p> <p>- Ongles : En cas d'application de traitement local par vernis ou solution filmogène et/ou traitement systémique, respecter un délai de 3 mois avant de prélever. Couper avec les ciseaux le bord libre de l'ongle et toute la partie de la zone atteinte décollée du lit de l'ongle. Eliminer les gros débris, puis gratter sous l'ongle et au niveau de la jonction entre la partie saine et la zone atteinte à l'aide d'une curette, d'une lame ou de petits ciseaux afin de récupérer en boîte de Pétri le magma friable. Grattage simple en superficie si leuconychie superficielle.</p> <p>- Cheveux et poils : prélever par arrachement le cheveu cassé ou les poils à proximité du bulbe avec une pince à épiler. Prélever éventuellement les squames et les croûtes en raclant à la curette. Si les lésions sont suppuratives, utiliser un écouillon. Recueil en boîte de Pétri.</p> <p>Dans tous les cas, compléter la feuille de travail « Prélèvement mycologique » en précisant les renseignements cliniques. Cette fiche est identifiée par une étiquette-patient et transmise en technique</p>
Transport conservation	- Squames, phanères, cheveux : température ambiante pendant 7 jours* - Ecouillons : température ambiante pendant 24 heures
Identité-vigilance	Chaque boîte de pétri, chaque écouillon doit porter une étiquette-patient
Elimination des déchets	Le Vaccinostyle et tout autre déchet contenant est éliminé dans les boîtes « à aiguilles » Les déchets potentiellement contaminés sont évacués en DASRI

* Cf Atlas de poche mycologie, Flammarion


INSTRUCTION DE PRELEVEMENT SARCOPTRE-DEMODEX- MALASSEZIA FURFUR

5.04-INS062

 <p>Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Instruction de prélèvement Sarcopte, Demodex et Malassezia Furfur</p>	<p>5.4-INS062 V01 Version : 1 Applicable le : 30-07-2024</p> 
Préleveurs	Biologiste : Diplôme de Médecin ou de Pharmacien Biologiste.	
Conditions	Avant tout traitement antifongique et parasitaire	
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> - Eau physiologique - Lames - Lamelles - Microscope - Pince à épiler - Curette - Ruban adhésif - Gants 	
Etapes	<p><input type="checkbox"/> Malassezia <u>Prélèvement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Au niveau des lésions caractéristiques (Tâches hypo ou hyper pigmentées au niveau du tronc, du dos et/ou de la face avec une légère desquamation (signe du « copeau ») pour Pytiriasis versicolor : Prélever par grattage avec une curette ou appliquer un ruban de cellophane adhésive (« Scotch-test ») • Dermite séborrhéique : Privilégier les zones grasses (Plis nasopharyngiens, sourcils, pourtour du cuir chevelu) ,folliculite : Prélever par grattage <p><input type="checkbox"/> Demodex <u>Prélèvement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Blépharite : Prélever à la pince à épiler environ 5 cils si possible • Démocidose : Récupérer par grattage les pustules et/ou les squames <p><input type="checkbox"/> Sarcopte <u>Prélèvement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Au niveau des sillons, des vésicules : mains, poignets, espaces interdigitaux, mamelons, aisselles, flancs • Au niveau des nodules scabieux : aisselles, ombilic, pubis, organes génitaux, fesses • Nourrissons et petits enfants : Plante des pieds <p>Possibilité d'utiliser le dermoscope pour la visualisation des adultes au sommet des vésicules sous la forme d'un delta noir</p> <p>Gratter avec un vaccinostyle ou une curette et déposer entre lame et lamelle dans une goutte de sérum physiologique</p>	
Transport conservation	Pas de conservation post analytique Conservation pré-analytique à température ambiante Pas d'envoi : techniqué directement en paillasse	
Identito-vigilance	Chaque échantillon doit être identifié	
Elimination des déchets	Les déchets potentiellement contaminés sont évacués en DASRI	

Page 1/1


INSTRUCTION DE PRELEVEMENT DE PUS SUPERFICIEL (BAGE)

 4.5-EXT001

Voir le Document Cerballiance : 4.5-EXT 001

Préconisations de prélèvements et fiches de renseignements prélèvements hors sanguin Cerballiance.

INSTRUCTION DE PRELEVEMENT TEST RESPIRATOIRE A L'UREE HELICOBACTER PYLORI: HELI-KIT®

 4.5-EXT 001

Voir le Document Cerballiance : 4.5-EXT 001

Préconisations de prélèvements et fiches de renseignements prélèvements hors sanguin
Cerballiance

LISTE DES ANALYSES NECESSITANT DES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

5.4-ENR014

EXAMENS	RENSEIGNEMENTS UTILES
NFS	Suivi d'hétopathie – Chimiothérapie (dates des cures précédentes et suivantes)- Urgence
RAI – Groupe sanguin	Injection d'anti-D et date - Notion de transfusion et date – En cas de grossesse : groupe sanguin du père - Groupe sanguin connu
Electrophorèse de l'hémoglobine	Antécédents familiaux - Anomalies du bilan Hémoglobine et fer – Macro ou microcytose - Origine ethnique
Bilan lipidique	Traitement
Créatinine	Poids
Troponine, CK-MB, BNP	Contexte clinique (date de début des troubles)
CPK	Traitement hypocholestérolémiant Douleur thoracique Injection récente Pratique sportive
Hémostase	Nature des anticoagulants et posologie ATCD Médicaux (hépatiques, hémorragies, thromboemboliques...) Traitement pouvant perturber les paramètres mesurés (Anticoagulants, antiagrégants...)
D-Dimères	Contexte clinique- traitement en cours
Activité anti-Xa	Traitement- Posologie- Horaires d'injection (Prise de sang 3-4 heures après si HBPM)
Protéine C - Protéine S	Thromboses - fausses couches antérieures- Bilan pré-opératoire
Dépistage de toxiques urinaires	Une fiche de recherche d'interférences médicamenteuse est remise à chaque patient. Il pourra y détailler les traitements suivis.
Dosage des médicaments (Digoxine, Dépakine, Lithium...)	Traitement – Posologie - Date et heure de la dernière prise
Trisomie 21	Ordonnance médicale - Renseignements cliniques - Fiche de consentement et attestation de consultation
HCG, bilan hormonal (LH, FSH, Oestradiol...)	Date des dernières règles – Test de grossesse rapide positif ou négatif (test de pharmacie) Contexte clinique et thérapeutique (PMA ?) - Urgence ?
Bilan thyroïdien	Traitement- Horaire de prise
T4 libre, T3 libre	traitement pour la pousse des cheveux et des ongles (demander le nom du médicament – biotine ?)
TSH (pour les femmes)	Grossesse ?
Test dynamique d'exploration	Contexte clinique - Motif de l'exploration - Traitements
Marqueurs tumoraux	Traitement - Suivi ou dépistage

Vitamine D	Traitement, pathologie
Quantiféron	Prise en charge Sécurité Sociale : enfant de moins de 15 ans, bilan initial pour patient VIH, avant mise en route d'un traitement par anti-TNF, aide au diagnostic du tuberculose paucibacillaire...
Syphilis	Traitement de moins d'un an en rapport avec la syphilis ?
Toxoplasmose, CMV	Grossesse et date – Clinique (ganglions, fièvre, VIH...)
Rubéole	Grossesse et date - Contexte clinique - Vaccination
Paludisme	Cf 5.4-INS004 « Questionnaire diagnostique du paludisme »
Coproculture	Une Fiche de Renseignements Clinico-épidémiologiques est à remettre à tous les patients pour lesquels une coproculture est prescrite (patients « société » et patients « sécu »)
Parasitologie des selles	<p>Patients « sécu » : Une Fiche de Renseignement Clinico-épidémiologique est à remettre à tous les patients pour lesquels une Parasitologie des selles est prescrite</p> <p>Patients « société » : Une Fiche de Renseignement Clinico-épidémiologique est à remettre aux patients signalant des symptômes digestifs</p>
Bactériologie et virologie Parasitologie et Mycologie	<p>But de l'analyse (diagnostic étiologique, choix ou suivi d'une antibiothérapie, contrôle d'efficacité thérapeutique)</p> <p>Signes cliniques</p> <p>Traitement en cours</p> <p>ATCD Médicaux (Immunodépression...)</p> <p>Voyage ; origine géographique ; animaux</p>
Recherche mutation génétique	Ordonnance médicale - Attestation de consultation et consentement éclairé - Renseignements cliniques

QUESTIONNAIRE DIAGNOSTIC DU PALUDISME

5.4-INS004

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

ETIQUETTE

1. DIAGNOSTIC

Signes cliniques :

- Fièvre et/ou Frissons. Depuis combien de temps ? :
- Troubles digestifs (*nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée*). Depuis comment de temps ? :
- Maux de tête. Depuis combien de temps ? :

Pays d'origine du patient :

Nom du pays visité dernièrement :

Date de retour de ce voyage :

Durée du séjour :

Avez-vous pris un traitement préventif pendant votre séjour ? OUI NON

Si oui lequel :

- Doxypalu* * (Doxycycline) *Lariam* * (Mefloquine)
- Malarone* * (Atovaquone+Proguanil) *Nivaquine* * (Chloroquine)
- Savarine* * (Proguanil+Chloroquine) *Paludrine* * (Proguanil)
- Autres : Préciser

L'avez-vous oublié au moins une fois pendant le séjour ?

2. SUIVI APRES TRAITEMENT

Quel traitement avez-vous pris ?

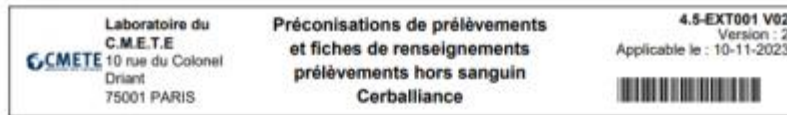
- Malarone* * (Atovaquone+Proguanil) *Nivaquine* * (Chloroquine)
- Lariam* * (Mefloquine) *Quinimax* * (Quinine)
- Halfan* * (Halofantrine) *Fansidar* * (Sulfadoxine+Pyrimethamine)
- Riamet* * = Coartem * *Eurartesim* * (Piperaquine+Artemimol)
- (Lumefantrine+Artemether)

Depuis combien de jours avez-vous terminé votre traitement ?

- 3 ou 4 jours
- 6 à 8 jours
- 26 à 30 jours

PRECONISATIONS POUR LE PATIENT : RECUEIL D'URINE POUR ECBU 2 EME JET

4.5-EXT 001



PRECONISATIONS – RECUEIL URINAIRE: ECBU

✍ Le recueil s'effectue de **préférence sur les urines du matin** (pas besoin d'être à jeun) et avant toute prise de traitement antibiotique. S'il doit, exceptionnellement, être réalisé dans la journée, faire le recueil loin d'une miction (**au moins 3 heures**).

✍ **Protocole :**

- EFFECTUER UN LAVAGE HYGIENIQUE DES MAINS
- EFFECTUER UNE TOILETTE INTIME AVEC UNE LINGETTE DESINFECTANTE OU DE L'EAU ET DU SAVON ;
- ELIMINER LE 1ER JET D'URINE DANS LES TOILETTES
- SI LE LABORATOIRE VOUS A REMIS UN FLACON AVEC UN BOUCHON BLEU OU JAUNE, **NE PAS OTER LA LANGUETTE EN PAPIER FIXEE SUR LE BOUCHON**
- URINER LE 2ème JET DANS LE FLACON STERILE (Ne l'ouvrir qu'au moment du recueil)
- REFERMER SOIGNEUSEMENT LE FLACON EN EVITANT DE TOUCHER LE BORD SUPERIEUR DU FLACON
- NOTER SUR L'ETIQUETTE VOS NOMS, PRENOMS ET HEURE DU RECUEIL
- REMPLIR LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES



Rapporter le plus rapidement possible le flacon au laboratoire.



SI LE TEMPS DE TRANSPORT DEPASSE 2 HEURES, METTRE IMPERATIVEMENT LES URINES AU REFRIGERATEUR.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ECBU

5.4-EXT002

Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS	Fiche de suivi médical externe bactériologie cerballiance	5.4-EXT002 V03 Version : 3 Applicable le : 01-12-2023
--	---	--

	FICHE-DE-SUIVI-MEDICAL-EXTERNE- BACTERIOLOGIE-(CENTRE-DE-SANTE)	Référence: DE-PRA-048 Version: -7 Date d'application: -28/07/2022 Page: 1 sur 1
---	---	--

PRELEVEMENT : URGENT <input type="checkbox"/> Nom du préleveur : _____ Date : __/__/____ Heure : __h__ Nature : Sang <input type="checkbox"/> Urines <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> Nb de tubes prélevés _____ Médecin extérieur : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Personnel de l'établissement de santé : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Etiquette GED
--	---------------

IDENTIFICATION DU PATIENT : Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Nom de naissance : _____ Date de Naissance : _____ Adresse : _____ Tél : _____ Port : _____ Etablissement de santé / Service : _____ Nom du médecin traitant (si prescription hospitalière) : _____
--

PRISE EN CHARGE : N° sécurité sociale : _____ Centre CPAM : _____ 100% <input type="checkbox"/> CMU <input type="checkbox"/> AME <input type="checkbox"/> Nom mutuelle : _____ N° mutuelle (télétrans) : _____

Accord pour la réalisation d'analyses hors nomenclature (non remboursables) : Je m'engage à régler la somme de _____ € au laboratoire Cerballiance Paris. Fait à Paris, le __/__/____ Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : _____ Accord téléphonique obtenu le __/__/____ à __h__
--

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Bilan préopératoire : Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Date et nature de l'opération : _____ Grossesse : Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> DDR : _____ Symptômes ou raison de la consultation : _____ Nature du prélèvement : _____ Fièvre : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> PV : <input type="checkbox"/> Brûlures mictionnelles <input type="checkbox"/> Brûlures génitales <input type="checkbox"/> Démangeaisons <input type="checkbox"/> Mictions fréquentes <input type="checkbox"/> Diarrhée <input type="checkbox"/> Selles : Sang / Glaire / Vers <input type="checkbox"/> Douleurs abdominales <input type="checkbox"/> Douleurs lombaires <input type="checkbox"/> Pertes/écoulement (préciser aspect et/ou odeur) <input type="checkbox"/> Antécédents (pyélonéphrite, salpingite, chlamydiae,...): _____ ECBU : 2 ^{ème} jet <input type="checkbox"/> Poche pédiatrique <input type="checkbox"/> Sonde à demeure <input type="checkbox"/> Sondage aller-retour <input type="checkbox"/> Brûlures mictionnelles <input type="checkbox"/> Douleurs lombaires <input type="checkbox"/> Douleurs abdominales <input type="checkbox"/> Antibiothérapie en cours : Nom : _____ Date de début : _____ S'agit-il d'un contrôle après traitement ? Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Nom : _____ Date de fin : _____ Coproculture/Parasitologie des selles : Diarrhées <input type="checkbox"/> Sang <input type="checkbox"/> Glaire <input type="checkbox"/> Nb de selles/j : _____ Séjour à l'étranger : _____ Date de retour : _____ ATCD de bactéries/virus/parasites : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Si oui, lesquels : _____ S'agit-il d'un contrôle après traitement ? Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Si oui, lequel : _____ Hémocultures : Prélèvement périphérique <input type="checkbox"/> Prélèvement sur matériel <input type="checkbox"/> Nb de flacons prélevés : _____ Chimiothérapie <input type="checkbox"/> Immunodépression <input type="checkbox"/> Suspicion d'endocardite <input type="checkbox"/> Autres : Nature du prélèvement : _____ Type de lésion (purulente, squameuse,...) : _____
--

RENDU DE RESULTATS : Laboratoire <input type="checkbox"/> promis le __/__/____ Postés patient <input type="checkbox"/> Postés Médecin <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> N° fax : _____ Internet (sauf sérologie HIV) <input type="checkbox"/> Email : _____

LABORATOIRE : Réceptionné par : _____ le __/__/____ à __h__ Etiqueté par : _____ Conformité Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> (Non-conformité N° : _____)

PRECONISATIONS ET RENSEIGNEMENTS CLINIQUES URINES DE 24H

5.4-INS030

Laboratoire du
C.M.E.T.E
10 rue du Colonel
Driant
75001 PARIS

Préconisations et
renseignements cliniques Urines
de 24h

5.4-INS030 V02
Version : 2
Applicable le : 20-08-2024



Pour la réalisation de certaines analyses prescrites par votre médecin, il est nécessaire de recueillir les urines pendant 24 heures.

Afin d'effectuer ce recueil dans les meilleures conditions, voici quelques recommandations.

Pendant toute la période de recueil éviter tout excès de boissons.

1. Premier jour : au lever, rejeter les urines aux toilettes
2. Noter sur la présente fiche le jour et l'heure de début de recueil
3. Pendant toute la journée et la nuit jusqu'au lendemain matin au lever (même heure que la veille), recueillir toutes les urines émises, dans le flacon.
4. Conserver le flacon au réfrigérateur (entre +2 et +4°C) entre chaque miction.
5. Noter sur la présente fiche le jour et l'heure de fin de recueil
6. La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les **plus brefs délais** (maximum 2 heures après la fin du recueil).

Exemple pour un lever à 8h du matin :



<p>NOM : _____</p> <p>Prénom : _____</p> <p>Norm de jeune fille : _____</p> <p>Date de naissance : _____</p> <p>Conditions de recueil :</p> <p>Date de début du recueil : _____</p> <p>Heure de début du recueil : _____</p> <p>Date de fin du recueil : _____</p> <p>Heure de fin du recueil : _____</p> <p>Symptômes cliniques - problèmes médicaux - traitement en cours</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Etiquette patient </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Réservé au laboratoire</p> <p>Urine remise au laboratoire : _____</p> <p>Date : _____</p> <p>Heure : _____</p> <p>Volume diurèse 24 h : _____</p> </div>
--	--

**Laboratoire du
C.M.E.T.E**
10 rue du Colonel
Driant
75001 PARIS

**Préconisations et
renseignements cliniques
recueil des selles**

5.4-INS020 V07
Version : 7
Applicable le : 14-06-2024



Votre médecin vous a prescrit un **examen Parasitologique des selles et/ou une Coproculture.**

Ces analyses ont pour but de rechercher au niveau des selles des parasites ou des bactéries responsables d'infections digestives.

Afin de permettre la réalisation de ces analyses dans les meilleures conditions, voici quelques recommandations concernant le recueil des selles.

Une émission des selles au sein du laboratoire est préférable.

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement :

- Antibiotiques,
- Antiseptiques intestinaux (ERCEFURYL, INTETRIX),
- Antiparasitaires (FLAGYL, FASIGYNE, FLAGENTYL),
- Huile de paraffine,
- Panséments intestinaux (SMECTA, CHARBON, CARBOSYLANE, GAVISCON, MAALOX...) et suppositoires, sauf GLYCERINE OU RECTOPANBILINE.

Un régime sans résidu est souhaitable pendant les trois jours précédant l'examen : Exclure en particulier les oléagineux (noix, noisettes, pistaches, amandes, cacahuètes, noix de cajou), les légumes secs (pois, haricots, lentilles), les fruits et légumes riches en fibres (choux, salade, tomates, pêches, fraises, figues...).

Enfin, ces examens sont à réaliser de préférence avant toute investigation digestive par imagerie (fibroscopie, coloscopie, lavement baryté...) ou au moins une semaine après cette investigation.


Déroulement du recueil

1. Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
2. Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
3. Noter la date et l'heure du recueil.
4. Apporter le flacon pour :
 - **la parasitologie** dans les 4 heures à température ambiante
 - **la coproculture** dans l'heure ou conserver au maximum 12 heures au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C).
 - **la parasitologie et coproculture** dans les 4 heures à température ambiante

NOM :	Prénom :	Etiquette patient
Nom de jeune fille :		
Date de naissance :		
Conditions de recueil :		
<input type="checkbox"/> Selles émises au laboratoire	<input type="checkbox"/> Selles apportées au laboratoire	
Date d'émission des selles :	Heure d'émission des selles :	
Selles remises au laboratoire à.....heures		
Conditions de conservation à domicile :		
<input type="checkbox"/> à température ambiante		
<input type="checkbox"/> au réfrigérateur		
Symptômes cliniques :		
<input type="checkbox"/> Diarrhées	<input type="checkbox"/> Douleurs Abdominales	
<input type="checkbox"/> Constipation	<input type="checkbox"/> Fièvre	
<input type="checkbox"/> Nausées-Vomissements	<input type="checkbox"/> Nausées-Vomissements	
<input type="checkbox"/> Autre :		
Contexte :		
<input type="checkbox"/> Séjour à l'étranger dans les dernières semaines		
Pays visité :		
<input type="checkbox"/> Cas isolé	<input type="checkbox"/> Cas similaires dans l'entourage	<input type="checkbox"/> Restauration collective
<input type="checkbox"/> Familial	<input type="checkbox"/> Crèche	<input type="checkbox"/> Ecole
<input type="checkbox"/> Traitement en cours	Lequel :	

PRECONISATIONS ET RENSEIGNEMENTS CLINIQUES SCOTCH-TEST

5.4-INS028

 Laboratoire du C.M.E.T.E
10 rue du Colonel Driant
75001 PARIS

Préconisations et renseignements cliniques Scotch
test

Ref : 5.4-INS028 V01
Version : 01
Applicable le : 15-01-2016



Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

Préconisations pour le prélèvement :


A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles.

- Décoller le scotch de son support.
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- Identifier l'étui avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

L'étui est acheminé au laboratoire dans les 4 heures suivant le prélèvement. A défaut, le prélèvement peut être conservé à température ambiante 48heures avant analyse.

Nom :	Prénom :
Nom de jeune fille :	<i>Etiquette patient</i>
Date de naissance	
Conditions de recueil :	
<input checked="" type="checkbox"/> Prélèvement réalisé au Laboratoire <input type="checkbox"/> Prélèvement apporté au laboratoire	Date du prélèvement :
	Heure du prélèvement :
	Remis au laboratoire
	àheures
Symptômes cliniques :	
<input checked="" type="checkbox"/> Diarrhées <input type="checkbox"/> Douleurs Abdominales	
<input checked="" type="checkbox"/> Démangeaisons anales <input type="checkbox"/> Insomnies	
<input type="checkbox"/> Autre :	
Contexte :	
<input checked="" type="checkbox"/> Antécédents d'Oxyures	
<input checked="" type="checkbox"/> Séjour à l'étranger dans les dernières semaines	
Pays visité :	
<input checked="" type="checkbox"/> Cas isolé <input type="checkbox"/> Cas similaires dans l'entourage	
	<input type="checkbox"/> Familial
	<input type="checkbox"/> Ecole
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement en cours	Lequel :



CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT AU PRELEVEMENT




 5.2-INS002

MALAISE	
Il s'agit principalement du malaise vagal induisant un hypo débit cérébral. C'est une urgence Les risques en sont la perte de connaissance (+ /- chute) et la crise convulsive.	
Symptômes	Pâleur Bourdonnements d'oreille Sensation de chaleur ou de froid Sudation Changement de comportement du patient au cours du prélèvement
Conduite à tenir préventive	Chez les sujets anxieux, en particulier, effectuer le prélèvement sanguin couché.
Conduite à tenir curative	Le préleveur doit agir vite. Cesser le prélèvement sanguin au plus vite, alerter les collègues avec la sonnette d'urgence. Mettre en décubitus complet le patient et maintenir les jambes surélevées quelques minutes pour restaurer le débit cérébral. Converser avec lui pour en apprécier l'efficacité. Prévenir le biologiste. En général les symptômes disparaissent rapidement (une minute) mais il faut garder le sujet allongé pendant 5 bonnes minutes ou plus pour éviter la récurrence. En cas d'échec : rester à côté du patient et faire appeler la biologiste. Dans tous les cas, ne rien faire ingérer à cause du risque d'inhalation.
HEMATOME	
Cause	Garrot trop serré, veine trop fine, piqure hésitante...
Conduite à tenir curative	Rassurer le patient. Compresser le point de prélèvement Poser une compresse alcoolisée

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT EXPOSITION AU SANG OU AUTRE LIQUIDE BIOLOGIQUE



5.2-INS004

 <p>Laboratoire du C.M.E.T.E 10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang ou autre liquide biologique</p>	<p>5.2-INS004 V05 Version : 5 Applicable le : 15-03-2024</p> 
---	---	---




Objet	Décrit la conduite à tenir en cas d'exposition au sang ou à tout autre liquide biologique	
Matériel	Compresse, Coton ou Papier absorbant Dakin / Eau de javel 2.6% de chlore à diluer au 1/5 ^e (au laboratoire : berlingot de javel 4.8° à diluer au 1/10 ^e) / Alcool 70° Sérum physiologique Collyre antiseptique	
Premiers soins Urgence	Situation	Action
	 Piqûre, blessure cutanée ou projection sur peau lésée	<ul style="list-style-type: none"> • Attention : Ne pas faire saigner la blessure • Nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante et au savon puis rincer • Tremper ou imbiber la zone blessée dans du Dakin ou solution de javel diluée ou à défaut dans alcool 70° pendant 10 mn
	 Projection d'échantillon biologique dans les yeux	<ul style="list-style-type: none"> • Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante (rince œil en technique) ou avec du sérum physiologique pendant 10 mn. • Retirer si c'est le cas, les lentilles de contact et instiller un collyre antiseptique • Consulter un ophtalmologue le plus rapidement possible
	 Projection d'échantillon biologique sur les muqueuses (bouche)	<ul style="list-style-type: none"> • Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 5 mn
Patient source et Suivi sérologique du personnel contaminé	<p><u>Patient source</u> OBTEINIR LE STATUT SEROLOGIQUE DU PATIENT SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patient physiquement présent ou prélèvement étiqueté : obtenir le statut sérologique du patient source (HIV, VHB, VHC) avec son accord • Source inconnue : à préciser au médecin référent <p><u>Personnel contaminé</u> Prélever la personne ayant subi l'AES pour établir son statut sérologique au moment de l'accident</p>	

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT THERMIQUE OU CHIMIQUE




5.2-INS001





<p>Laboratoire du C.M.E.T.E  10 rue du Colonel Driant 75001 PARIS</p>	<p>Conduite à tenir en cas d'accident thermique ou chimique</p>	<p>5.2-INS001 V04 Version : 4 Applicable le : 14-10-2024</p> 
--	--	--

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT THERMIQUE OU CHIMIQUE






Situation	Action
 Brûlures thermiques superficielles : rougeurs	<ul style="list-style-type: none"> • Refroidir la surface brûlée le plus rapidement possible en appliquant la règle des trois 15 : faire ruisseler l'eau sur la région atteinte à une distance de 15 cm du robinet, avec une eau froide à 15-20°C pendant 15 min • Protéger la brûlure par un pansement • Appliquer une pommade adaptée sur la zone concernée après les conseils d'un médecin ou d'un pharmacien
 Brûlures thermiques profondes (rougeurs et cloques)	<ul style="list-style-type: none"> • Refroidir le plus rapidement possible en appliquant la règle des trois 15 • Retirer les vêtements, bague, montre, bracelets pendant l'arrosage sauf si ceux-ci adhèrent à la peau • Protéger la brûlure avec un linge propre ou compresses stériles (ne mettre ni produit, ni pansement) • En cas de brûlure étendue : allonger la victime et appeler les secours immédiatement (15 ou 112)
 Brûlures électriques	<ul style="list-style-type: none"> • Couper immédiatement le courant • Dégager la victime de la source électrique avec un objet sec et non conducteur (bois, carton) puis s'isoler du sol en montant sur une surface non conductrice (bois, carton) • Arroser la zone brûlée à l'eau courante tempérée • Appeler les secours immédiatement (15 ou 112) : respecter les instructions données par l'opérateur • Si la personne est consciente, surveiller-la attentivement jusqu'à la venue des secours • Placer la personne brûlée en position latérale de sécurité si elle est inconsciente sinon la mettre en position semi- assise




 Brûlures par inhalation	<ul style="list-style-type: none"> • Appeler les secours immédiatement (15 ou 112) • Prendre toutes les mesures afin d'améliorer la respiration de la victime : la faire quitter de la pièce pour la faire respirer l'air libre et la mettre en position assise : lui libérer ses voies respiratoires en desserrant ses vêtements • Attention : Ne jamais donner à boire.
 Brûlures par ingestion	<ul style="list-style-type: none"> • Appeler les secours immédiatement (15 ou 112) • Mettre la personne en position latérale de sécurité en la surveillant • Appeler le centre anti-poison le plus proche • Ne jamais donner à boire • Ne pas faire vomir
 Projections de produit chimique	<ul style="list-style-type: none"> • En cas de projection localisée : rincer la zone atteinte abondamment à l'eau pendant au moins 15 min après avoir fait déshabiller la victime si nécessaire • En cas de projection importante et/ou répartie sur une grande partie du corps, amener la victime sous une douche, la rincer, la faire se déshabiller sous la douche et continuer à la rincer pendant au moins 15 min. Eviter autant que possible le contact entre l'eau de rinçage et la peau saine. <p>Si les vêtements sont contaminés : enfiler des gants et mettre les vêtements dans un sac plastique double pour éviter de brûler d'autres personnes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'œil est atteint, rincer à l'eau, de préférence avec un rince-œil, abondamment, en maintenant l'œil ouvert pendant au moins 15 min • Prendre contact avec un médecin pour avoir un avis médical ou appeler le centre anti-poison

Numeros utiles	
 Pompiers : 18 ou 112	 SAMU : 15
 Centre anti-poison (Hôpital Fernand-Widal) 01 40 05 48 48	 SOS médecin : 01.47.07.77.77



PICTOGRAMMES DE DANGER PRESENTS AU LABORATOIRE			
	Pictogrammes	Risques	Précautions à prendre
DANGER PHYSIQUE	 Inflammable	Substance pouvant s'enflammer : - sous l'effet de la chaleur, de frottement ou d'un choc - au contact d'une étincelle, d'électricité statique ou d'une flamme - au contact de l'air ou de l'eau s'il y a un dégagement de gaz inflammable.	A manipuler loin de toute flamme ou étincelle et à conserver à l'abri de la chaleur.
	 Corrosif	Attaque ou détruit les métaux. Ronge la peau et/ou les yeux en cas de contact ou projection	Eviter tout contact avec la peau mais aussi les vêtements
DANGER POUR LA SANTE	 Toxicité aiguë	Substance qui empoisonne rapidement, même à faible dose, par inhalation, ingestion et/ou contact cutané.	Ne doit en aucun cas rentrer au contact avec n'importe quelle partie du corps. Il ne doit même pas être respiré sous peine de graves risques pour la santé.
	 Nocif ou irritant	Cette substance peut empoisonner en cas d'exposition à forte dose Elle irrite les yeux, la peau ou les voies respiratoires Elle peut provoquer des allergies, somnolence ou vertiges	Le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et ne doit pas être inhalé
	 Danger pour la santé	Cette substance est cancérigène et mutagène sur les cellules germinales Elle a des effets néfastes sur le fœtus en cas de grossesse et est toxique pour certains organes. Ce produit provoque des allergies respiratoires et est mortel en cas d'ingestion.	Le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et ne doit pas être inhalé ou ingéré. La manipulation de ce produit est interdite en cas de grossesse

ELIMINATION DES DECHETS

 5.2-INS003


Tri des déchets	Type de déchets	Phase préliminaire	Filière d'élimination
	Documents confidentiels identifiants des patients, des prescripteurs, ou concernant le fonctionnement du laboratoire	Destructeur de documents	SHRED-IT Conteneurs de collecte de documents au secrétariat du rdc et au 1 ^{er} étage dans le bureau du comptable.
	Documents confidentiels non		Poubelle papier
	Cartouches imprimantes laser ou jet d'encre	Emballage d'origine	SOCIETE SPECIALISEE
	Matériel coupant, piquant, tranchant	<i>Collecteur DASRI pour objet coupant, tranchant et piquant</i>	DASRI
	Emballages des objets à usage unique en salle de prélèvement	Poubelle dédiée sur chariot prélèvements	DASRI
	Matériel de prélèvement non tranchant, non coupant, non piquant	Poubelle dédiée sur chariot prélèvements	DASRI
	Matériel technique en contact avec un liquide biologique contaminé ou potentiellement contaminé	Container DASRI	DASRI
	Tubes, flacons contenant ou ayant contenu un liquide biologique	Container DASRI	DASRI
	Réactifs en contenants fermés	Container DASRI	DASRI
Colorants, réactifs en vrac (bac à coloration)	Bidon dédié	DASRI	

**Conditions
d'utilisation
des
containers
spécifiques**

- Collecteurs DASRI pour objets coupants, tranchants et piquants :
Poser le collecteur sur une surface plane et stable ou le fixer au montant du chariot de prélèvements
Remplir le collecteur jusqu'au niveau de remplissage
Refermer le collecteur conformément aux préconisations fournisseurs



- Containers à DASRI :
A l'ouverture,
 Au marqueur indiquer la date d'ouverture
Lors de l'utilisation :
 remplir le container jusqu'au niveau de remplissage
A la fermeture :
 mettre le capot
 au marqueur indiquer la date de fermeture

LISTE DES SOUS-TRAITANTS







 4.5-ENR004



Laboratoire sous-traitant	Adresse
AMERICAN HOSPITAL OF PARIS (AHP)	63 Bd Victor Hugo B.P. 109 92202 NEUILLY sur Seine
CERBA	7-11 rue de l'Equerre Parc d'activités « les Béthunes » 95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
CERBALLIANCE IDF EST St Quentin Magenta	88 Boulevard Magenta 75010 PARIS

CATALOGUE DES ANALYSES REALISEES AU LABORATOIRE

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité avant centrifugation à T° ambiante	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence
				-20°C	4°C à 8°C	15°C à 25°C		
BIOCHIMIE SANGUINE								
AU	Acide Urique	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	3j	J0 (sauf si prélèvement après 13h, alors J+1)	TLJ
GOT	ASAT	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	4j		
GPT	ALAT	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	3j		
RA	Bicarbonates / CO2 / Réserve Alcaline	Tube jaune 300 µL	Quelques heures	/	Quelques heures	/		
B	Bilirubine Totale	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	1j		
	Bilirubine Directe	Tube jaune 300 µL	/	/	3j A l'abri de la lumière	3j		
CA	Calcium	Tube jaune 300 µL	1j	/	21j	7j		
C	Cholestérol total 	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	/		
	Cholestérol HDL 	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	2j		
CPK	CPK	Tube jaune 300 µL	8 à 12h	/	8 à 12h	4h		
CRCL	Créatinine (1)	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	7j		
CRPN	CRP	Tube jaune 300 µL	1j	/	2m	11j		
FE	Fer sérique	Tube jaune 300 µL	1j	/	21j	7j		
GGT	Gamma GT	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	7j		

(1) ne pas prélever après un repas carné

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité avant centrifugation à T° ambiante	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence
				-20°C	4°C à 8°C	15°C à 25°C		
BIOCHIMIE SANGUINE								
G	Glucose 	Tube jaune 300 µL	< 2h	/	7j	2j	JO (sauf si prélèvement après 13h, alors J+1)	TU
GPP1 (<i>après repas uniquement</i>)	Glycémie + post prandiale 	Tube jaune 300 µL	< 2h	/	7j	2j		
GPC (<i>à jeun + après charge 1h ou 2h</i>)	Glycémie post- charge / Test de Sullivan  	Tube jaune 300 µL	< 2h	/	7j	2j		
HGP3 (<i>à jeun + 2 post charge</i>)	Hyperglycémie provoquée par voie orale  	Tube jaune 300 µL	< 2h	/	7j	2j		
HGP4 (<i>à jeun + 3 post charge</i>)								
MG	Magnésium	Tube jaune 300 µL	1j	/	/	7j		
PAL	Phosphatases alcalines	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	7j		

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité avant centrifugation à T° ambiante	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence		
				-20°C	4°C à 8°C	15°C à 25°C				
BIOCHIMIE SANGUINE										
P	Phosphore	Tube jaune 300 µL	1j	/	4j	1j	J0 (sauf si prélèvement après 13h, alors J+1)	TU		
K	Potassium	Tube jaune 300 µL	2h	/	42j	42j				
PT	Protéines totales	Tube jaune 300 µL	1j	/	28j	6j				
NA	Sodium	Tube jaune 300 µL	1j	/	14j	14j				
CST	Transferrine	Tube jaune 300 µL	1j	/	8m	4m				
T	Triglycérides 	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	2j				
U UHN (hors nomenclature)	Urée	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	7j				
Analytes groupés de BIOCHIMIE SANGUINE										
TRAN	Transaminases (ASAT, ALAT)	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	3j				
IONO	Ionogramme (NA, K, CL)	Tube jaune 300 µL	2h	/	7j	7j				
BLI	Bilan lipidique (cholestérol, Triglycérides, HDL-cholestérol) 	Tube jaune 300 µL	1j	/	7j	/				
CST	Fer sérique, Transferrine	Tube jaune 300 µL	1j	/	21j	7j				
B2	Bilirubine totale, bilirubine directe	Tube jaune 300 µL	/	/	3j A l'abri de la lumière	1j				
BIOCHIMIE sur électrophorèse capillaire.										
CDTI	CDT, Carboxy déficient transferrine	Tube jaune 300 µL	/	12 mois	10j	48H	J+4	2 x/ sem		
HBA1	Hémoglobine glycosylé, A1C	Tube violet EDTA 1 mL	/	/	7j	18H	J+7	1x/ sem		

/ : Aucune préconisation de notre fournisseur Beckman Coulter

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire		Préparation	Stabilité			Délai	Fréquence
					-20°C	2°C à 8°C	15°C à 25°C		
BIOCHIMIE URINAIRE									
UAU (24h)	Acide Urique Urinaire	Tube plastique 300 µL		Ajuster le pH entre 8 et 9 avec du NaOH	/	/	4j	J0 (sauf si prélèvement après 13h, alors J+1)	TLU
UCA (24h)	Calcium Urinaire	Tube plastique 300 µL		Acidifier avec HCL 1N (pH=5)	/	4j	2j		
CRU (éch)	Créatinine Urinaire	Tube plastique 300 µL		/	/	24H	/		
CRU24 (24h)	Créatinine Urinaire								
CLCR (24h)(sang+urines)	Clairance de la créatinine	Tube plastique 300 µL	Tube jaune 300 µL	/	/	/	/		
US (éch)	Glucose Urinaire	Tube plastique 300 µL		/	/	2h	dès que possible		
KU (éch) KU24 (24h)	Potassium Urinaire	Tube plastique 300 µL		Centrifuger si urines troubles	/	45j	45j		
UA (éch) UA24 (24 h)	Protéines Urinaires	Tube plastique 300 µL		/	/	48h	/		
NAU (éch) NAU24 (24h)	Sodium Urinaire	Tube plastique 300 µL		Centrifuger si urines troubles	/	45j	45j		
URUR (éch) URUR24 (24h)	Urée Urinaire	Tube plastique 300 µL		/	/	7j	2j		
CLU (éch) CLU24 (24h)	Chlore Urinaire	Tube plastique 300 µL		Centrifuger si urines troubles	/	/	45j		
Analytes groupés de BIOCHIMIE URINAIRE									
IONU (éch ou 24h) IONU24 (24h)	Ionogramme urinaire (Na + K +Cl urinaire)	Tube plastique 300 µL		Centrifuger si urines troubles	/	/	45j		

Codes	Paramètres	Types d'échantillons acceptés	Stabilité			Délai	Fréquence
			-20°C	2°C à 8°C	20°C à 25°C		
TOXICOLOGIE URINAIRE							
BENZ	Benzodiazépine (BENZ)	Urines sur flacon sans borates stérile	6 mois (1 seule décongélation)	48h	Le plus rapidement possible.	J0	TLJ
DR01	Drogues : Opiacés (MOR), Cocaïne (COC), Cannabis (THC), Amphétamines (AMP), ECSTASY (XTC), Métamphétamines (MET)						
BARB	Barbituriques (BAR)						
PHEC	Phencyclidine (PCP)						
METH	Méthadone (MTD),						
DEXT	Dextropropoxyphène (PPX)						

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité avant centrifugation à T° ambiante	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence
				-20°C	2°C à 8°C	20°C à 25°C		
HORMONOLOGIE								
TSH	TSH (3)Ⓢ	Tube jaune 1000 µL	Dès que possible	90j décongeler 2 fois	7j	18h	J+1	TL J
T4	T4 libre (3)(4)Ⓢ	Tube jaune 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 1 fois	48h	8h		
T3	T3 libre (3)Ⓢ	Tube jaune 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 3 fois	48h	8h		
HCGQ	βHCG	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	6m décongeler 1 fois	48h	8h	J0 si avant 12h	
PSA	PSA	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	5m	24h	/	J+1	
PSA2	PSA libre	Tube jaune + SERO 1000 µL	3h	5m	24h	/		
Analytes groupés de HORMONOLOGIE								
TST4	TSH, T4L (3)(4)Ⓢ	Tube jaune 1000 µL	Dès que possible	90j décongeler 1 fois	48h	8h	J+1	TL J
T3T4	T3L, T4L (3)(4)Ⓢ	Tube jaune 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 1 fois	48h	8h		
THYR	TSH, T3L, T4L (3)(4)Ⓢ	Tube jaune 1000 µL	Dès que possible	90j décongeler 1 fois	48h	8h		
PSAL	PSA, PSA Libre	Tube jaune + SERO 1000 µL	3h	5m	24h	/		

(3) prélever toujours dans les mêmes conditions (même heure de prélèvement, même délai par rapport à la prise du médicament)

(4) A distance de la prise de Levothyroxine .

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité avant centrifugation à T° ambiante	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence
				-20°C	2°C à 8°C	20°C à 25°C		
SEROLOGIE INFECTIEUSE								
FERR	Ferritine	Tube jaune 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 1 fois	48h	8h	J+1	TLJ
HAVG	Ac HAV	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 3 fois	48h	8h		
AGBS seul (5) <i>(uniquement surveillance de grossesse sinon HEPB)</i>	Hépatite B Ag HBs	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 5 fois	4j	8h		
ACBS seul <i>(uniquement statut immunitaire : vaccination sinon HEPB)</i>	Hépatite B Ac HBs	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 5 fois	4j	8h		
HBSC	AgHbS confirmation	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 5 fois	4j	8h		
HCV	Hépatite C	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 5 fois	7j	4j		
RUB1	Rubéole IgG	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 3 fois	48h	8h	J+1	
Analytes groupés de SEROLOGIE INFECTIEUSE								
HEPB (5)	Hépatite B : Ac HBc, Ag HBs, Ac HBs; AgHbS confirmation	Tube jaune + SERO 1000 µL	Dès que possible	1 an décongeler 1 fois	48h	8h	J+1	TLJ
HBGU <i>(contrôle guérison)</i>	Ag HBs, Ac HBs							

(5) technique de confirmation si besoin à rajouter par le technicien en fonction des résultats

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité avant centrifugation à T° ambiante	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence
				-20°C	2°C à 8°C	20°C à 25°C		
SEROLOGIE INFECTIEUSE								
BW (<i>En l'absence de suivi de traitement</i>) BWX (<i>dans le cadre de mon Test IST</i>) VDRL (<i>si BW positif</i>)	Syphilis (EIA)	Tube jaune + SERO 200 µL	Dès que possible	1 an décongeler 3 fois	7j	/	J+ 2	TLJ
VDR2 (<i>prélèvement de contrôle 15j après le dépistage</i>) VDRT (<i>En cas de suivi thérapeutique</i>)	Syphilis (VDRL)			1 an décongeler 5 fois			J+ 1	
VIH2 VIHX (<i>dans le cadre de mon Test IST</i>)	VIH			Tube jaune + SERO 1000 µL			Dès que possible	

REMARQUE : PRELEVER SYSTEMATIQUEMENT UNE SEROTHEQUE (Tube jaune) POUR TOUS LES BILANS CMETE MEME EN L'ABSENCE DE SEROLOGIES.

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité avant centrifugation à T° ambiante	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence
				-20°C	2°C à 8°C	20°C à 25°C		
QUANTIFERON (6)								
QUAN (société)	Tuberculose	Tubes Quantiferon TB gold jusqu'au trait de remplissage	Tubes TB gold : Avant incubation à 37°C :16h à Temperature. Amb Tube vert (hépariné): -Jusqu'à 16h à temp. Ambiante (17-25°C) - Jusqu'à 48h à 2-8°C avant transfert : dans les tubes TB GOLD (△Stabiliser les tubes à T°Ambiante (17-25°C) avant de les aliquoter dans les tubes TBGOLD.)	/	28j	/	J+ 3 à J+ 7	2 à 5 séries de 21 patients par semaine
QUSS (EXT nomenclature)		OU Tube vert (7 mL)						
QUHN (EXT HN)								
METABOLISME								
VITD VDHN (Hors nomenclature)	Vitamine D	Tube jaune (bouché) 5 mL	Dès que possible	1 an Décongele r 3 fois	7j	8h	J+3	2 fois par semaine minimum

(6) Pour le Quantiféron : inscrire sur la prescription, pour les patients DRS (ou sur la fiche de suivi médical pour les patients externes) :

la lettre « H » derrière l'analyse quand prélevé sur Héparine
 la mention « 4T » derrière l'analyse, quand prélevé sur les 4 tubes TB Gold

Codes	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Pas de centrifugation			Délai	Fréquence
			Stabilité à -20°C	Stabilité de 2 à 8°C	Stabilité de 20 à 25°C		
HEMATOCYTOLOGIE							
NFP	Numération Formule sanguine Hémogramme + plaquettes	Sang total sur tube violet (ou bleu si agrégation sur EDTA) 1 mL	NA	48h	24h	J0	TLJ
PL	Plaquettes	Tube violet (ou bleu si agrégation sur EDTA) 1 mL	NA	48h	24h		
GE	Recherche Plasmodium (Goutte épaisse) Paludisme test rapide	Sang total sur tube violet 1 mL	> 1 an, 2 cycles de décongélation maximum.	72h	7h		

CODES	Paramètres	Tubes de prélèvement (couleur du bouchon) Quantité minimale nécessaire	Stabilité après centrifugation, tubes bouchés			Délai	Fréquence
			-20°C	2°C à 8°C	20°C à 25°C		
IMMUNO-HEMATOLOGIE							
GS	Groupe ABO Phénotype Rh Kell	Tube violet 5 mL	/	<7j	/	J+1	TLJ (pas le vendredi après 14h sauf urgence)
RAI	RAI dépistage	Tube violet 5 mL	/	48h	/		

(4) à transvaser en tube VS

Codes	Paramètres	Types d'échantillons acceptés	Stabilité			Délai	Fréquence
			-20°C	2°C à 8°C	Ambiant		
URINES							
BDUR (société uniquement)	(Sang, globules blancs, nitrites,cétone)	Urines dans flacon stérile	NA	24h	2h	JO	TLJ
UBIL	Bilharziose	Urines (si possible : miction après effort)		24h	8H	J+1	
UPH	pH	Urines dans flacon stérile	NA	24h	2h	JO	TLJ
UNIT	Nitrites urinaires	Urines dans flacon stérile	NA	24h	2h	JO	TLJ
UAC	Cétone urinaire	Urines dans flacon stérile	NA	24h	2h	JO	TLJ








Codes	Paramètres	Types d'échantillons acceptés	Stabilité			Délai	Fréquence
			-20°C	2°C à 8°C	Ambiant		
SELLES							
PARA	Parasitologie des selles	Selles en flacon	NA	24H	2h pour des selles fraîches	J0	TLJ
BAER	Recherche d'Anguillule par la technique de Baerman	Selles en flacon (apportées avant 13h)		NA	12h		

Codes	Paramètres	Types d'échantillons acceptés	Stabilité			Délai	Fréquence
			-20°C	2°C à 8°C	Ambiant		
PEAU							
DEMO	Recherche de Demodex	cils	NA	NA	A analyser immédiatement	J0	TLJ
MYCD	Recherche de Malassezia Furfur	Peau (test à la cellophane)			1 semaine		
GALE	Recherche de Sarcopte	Produits de grattage des lésions sur lame			A analyser immédiatement		
SCO	Scotch test anal	Cellophane adhésive transparente (préalablement déposée sur le pourtour anal) collée sur la lame porte objet			48h	J0	
MYCO	Ongles	Ongles dans boîte de Pétri			1 semaine	3s	
MYCO	Peau	Matériel prélevé dans boîte de Pétri ou écouvillons sur milieu de transport					
MYCO	Cheveux	Cheveux dans boîte de Pétri					

Références :




- Conditions de jeûne :
 - Influence of diet and sample collection time on 77 laboratory tests on healthy adults ; D. Plumelle, Elise Lombard, Alain Nicolay, Henri Portugal. Clinical Biochemistry, novembre 2013.
- Hématocytologie :
 - Référentiel COULTER DxH 600
 - Manuel d'utilisation DxH 600
 - Cahier de Bioformation
- Biochimie :
 - Manuel Information Réactif / BECKMAN COULTER
 - Conservation des échantillons biologiques avant et après centrifugation : effet de la nature des tubes, de la température et du délai avant analyse ; C.ODDOZE, E.LOMBARD, H.PORTUGAL ; Feuilles de biologie ; VOL LIII N°308
- Immuno- hématologie :
 - Dossier technique et notice réactif diagnostic GRIFFOLS
- Immuno-dosages :
 - Notices réactifs Access
 - Notice réactifs quantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) ELISA
 - Notice Syphilis (BW et VDRL)
- Parasitologie / Mycologie :
 - Servibio trousse de concentration pour parasites fécaux


Légende :

	Tube vert	Héparine de lithium → plasma hépariné (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
	Tube bleu	Citrate de sodium → plasma citraté (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
	Tube violet	EDTA K3 → sang total ou plasma EDTA (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
	Tube jaune	Activateur de coagulation + gel → sérum (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
	Tube rouge	Activateur de coagulation + gel → sérum (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
	Tube noir	Tubes BD Vacutainer® Citrate de Sodium 4NC pour Vitesse de Sédimentation par méthode traditionnelle. (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
	Tubes Quantiferon TB Gold Plus	1 tube QuantiFERON-TB à bouchon gris (NIL) (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
		1 tube QuantiFERON-TB à bouchon violet (MITOGEN) (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
		1 tube QuantiFERON-TB à bouchon vert (TB ANTIGEN) (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)
		1 tube QuantiFERON-TB à bouchon jaune (TB ANTIGEN) (Conservation à T° ambiante jusqu'à la date de péremption indiquée sur le tube)

- **min** : minute
- **h** : heure
- **j** : jour
- **s** : semaine
- **m** : mois
- **TLJ** : tous les jours, sauf nuit, samedi, dimanche et jours fériés
- **NA** : Non applicable
- **SERO** : Sérothèque
- ***** : Le délai de rendu peut être supérieur au délai annoncé en cas de positivité, d'examen complémentaire ou d'envoi en sous-traitance pour contrôle

NB : Les tubes jaunes et les tubes rouges possèdent les mêmes composants, seule la couleur des bouchons change pour simplifier la répartition des tubes dans le laboratoire. Il n'est donc pas impératif de respecter la couleur des bouchons tant que ce sont des tubes avec activateur de coagulation et gel.

	A jeun strict depuis 10h-12h		Venir toujours à la même heure		Prévoir de rester au laboratoire de 1 à 3 heures
---	--	---	-----------------------------------	---	---

 Pour les analyses sanguines ne nécessitant pas de jeûne strict, un délai de 3h après le repas est fortement recommandé.

Délais de rendu des résultats : Les délais s'entendent pour des prélèvements effectués avant 13h en semaine. Après 13h il faut rajouter 1 jour au délai prévu.

- J0 : résultat rendu le soir même à partir de 16H00
- J+1 : résultat rendu le lendemain (jour ouvrable) à partir de 16H00
- J+3 : résultat rendu 72H après le prélèvement (jour ouvrable), à partir de 16H00.

Des examens peuvent être transmis à des laboratoires spécialisés ce qui peut induire un délai de rendu de résultats plus important. Les examens sous-traités sont envoyés au laboratoire sous-traitant sauf avis contraire du patient ou du médecin prescripteur.

Quantité minimale nécessaire :

La quantité minimale nécessaire a été déterminée pour chaque paramètre en fonction du volume du test de l'échantillon et des volumes morts (système, pipeteur d'échantillon, récipient échantillon).

Si plusieurs paramètres sont demandés pour un même secteur (Biochimie, Hématologie...), il est préférable de fournir le tube demandé plein (5 mL). Et prévoir un seul tube de sérothèque par patient.

NB : Le tube destiné à la sérothèque contiendra environ 2,5 ml de sérum après centrifugation.

Délai minimum avant centrifugation : Tube jaune et tube rouge: minimum 30 minutes selon le fournisseur
Tube vert et tube bleu : pas de délai minimum avant centrifugation

Examens externalisés :

Cette liste n'est pas exhaustive. Concernant les examens envoyés aux laboratoires de biologie médicale spécialisées et non référencés dans le catalogue, se référer aux catalogues d'examens des laboratoires concernés.

Les paramètres non répertoriés sont confiés aux laboratoires sous-traitants.